



Upgrade · The Home Creator Way

LAB DISTILLATION APPARATUS

USER MANUAL

MODEL:YHEO-3

MODEL:YHEO-3



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can

result in serious injury.

Assembly precautions

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear safety goggles and duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the Lab Distillation Apparatus.
8. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.

Use precautions

1. DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM.
2. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
3. Do not exceed weight capacities.
4. Use only on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting a fully loaded Lab Distillation Apparatus.
5. Use as intended only.
6. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.
7. The product complies with relevant standards and regulations.
Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
8. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or

instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

9. Children shall not play with the appliance
10. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
11. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - Offices environments;
 - farm houses;
12. Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it
13. Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.

SAVE THIS MANUAL

INSTRUCTIONS


Thank you very much for choosing this model. Glass fittings should always be handled with care. Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.

Parts name	Number of parts	Description
Flask	1	500ml
Coil condenser	1	/
Pear-shaped Separatory funnel	1	125ml
Conical flask	1	100ml
Glass stopper	2	19#
beaker	1	100ml
Glue head dropper	1	Red glue head
Alcohol burner	1	150ml
thermometer	1	100℃
Rubber plug	4	/

Latex tubing	1	2m
Vacuum grease	1	Vaseline
PH test paper	1	/
Flask brush	1	Small size
Iron support stand	2	With 40cm supporting pole
Flask clamp	2	/
Cross clamp	2	/
Horn tube	1	/
Circular ring	2	1 of 5.1cm, 1 of 7.3cm
Terracotta net	1	/

OPERATION


1. Assemble the iron support stand;

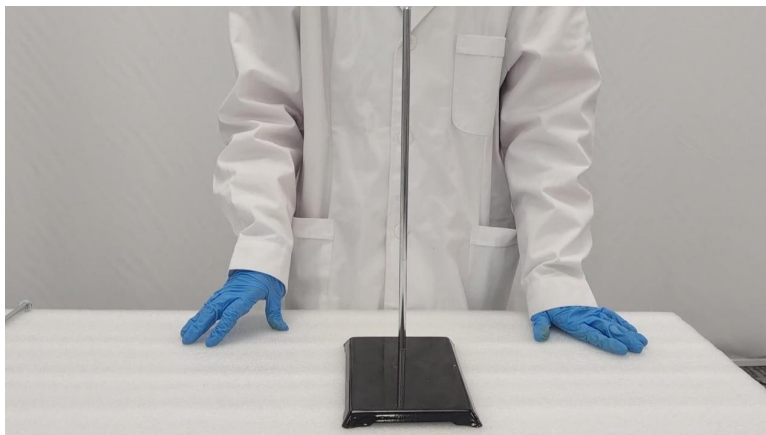


2. Place alcohol burner;




3. Install the circular ring;

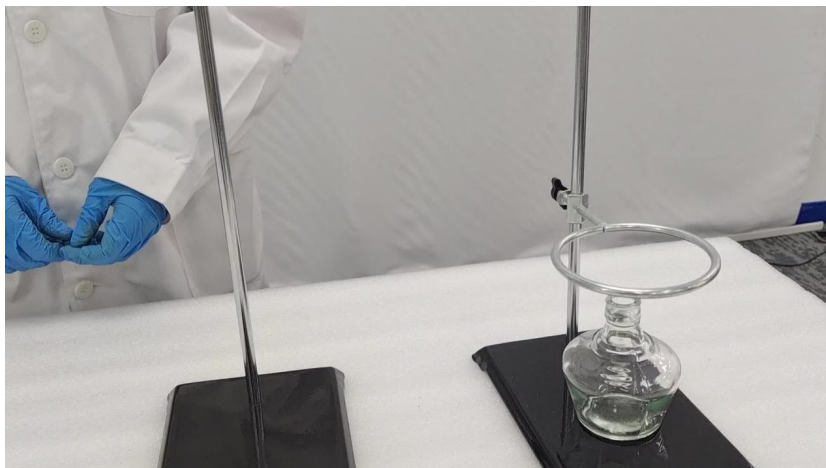


4. Place the terracotta net on the circular ring , and install the cross clamp and flask clamp at the appropriate height;

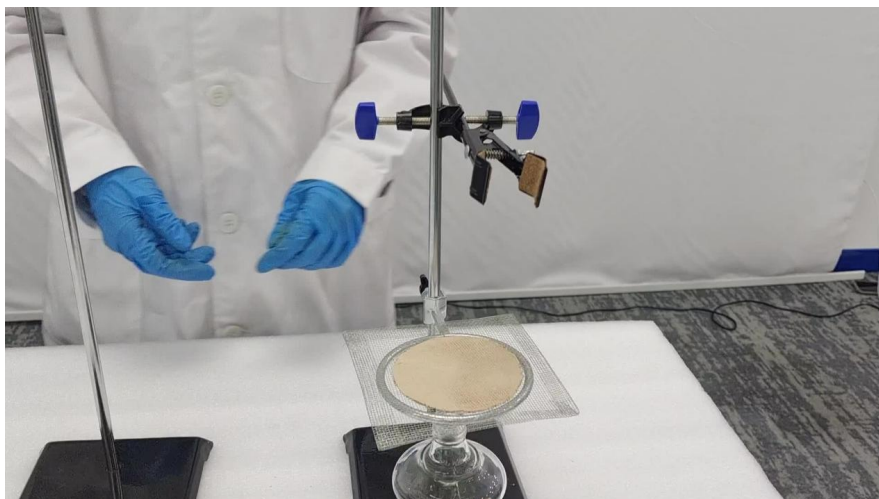


5. Install the flask, and install the cross clamp at the appropriate height of the other iron support stand;

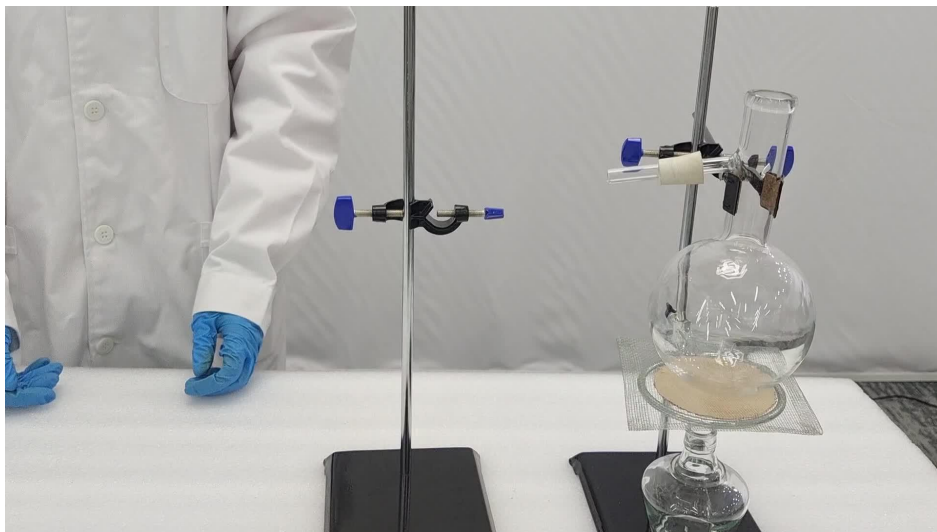


6. Install the coil condenser and fix it with the flask clamp;

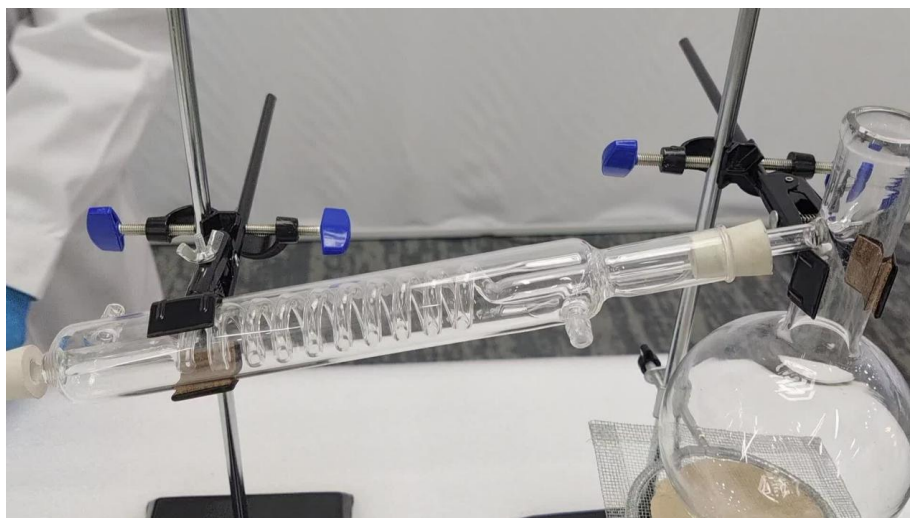


7. Install the horn tube and place the conical flask under the outlet of horn tube;

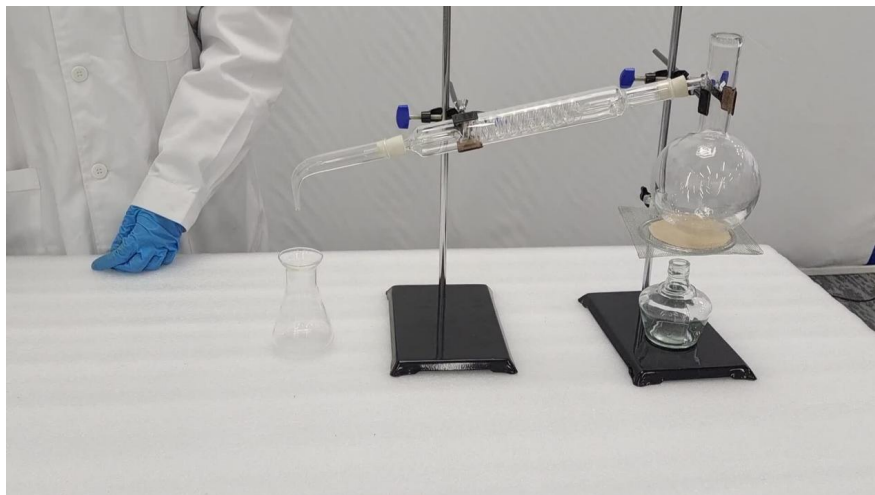

8. Install the circular ring at the appropriate height of the iron support stand, and place the pear-shaped separatory funnel on it, then place the beaker below the outlet of the pear-shaped separatory funnel;

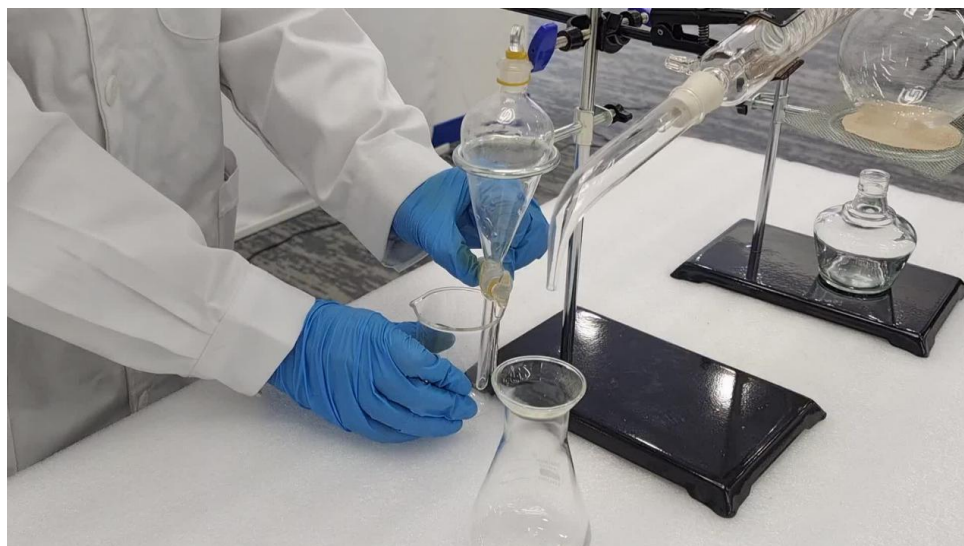

9. Screw the thermometer into the rubber plug and install the rubber plug in the mouth of the flask.

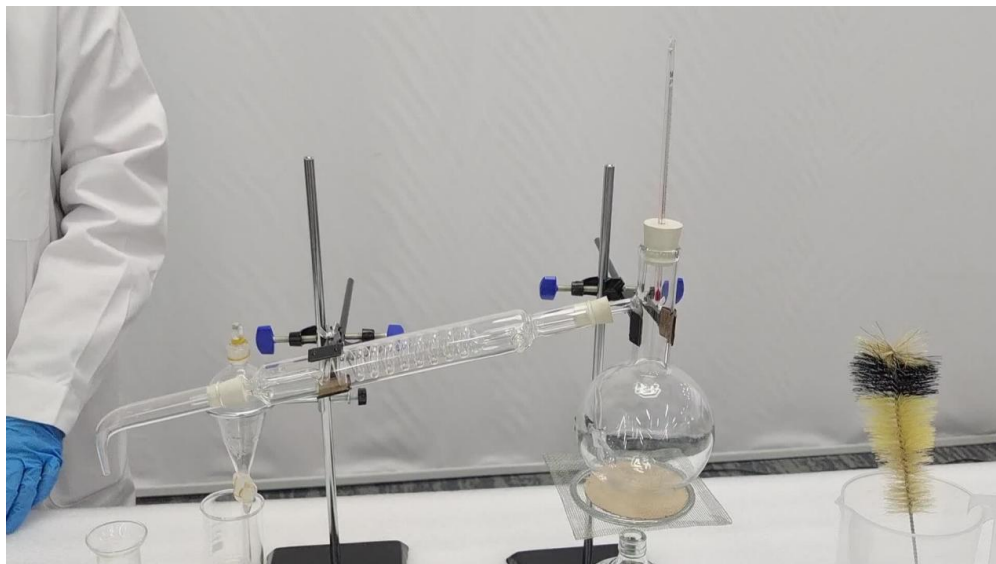

PRODUCT PARAMETER

Model	YHEO-3
Heating Method	Alcohol Burner
Flask Type	Distilling Flask





Upgrade · The Home Creator Way

**APPAREIL DE DISTILLATION DE
LABORATOIRE**

MANUEL D' utilisation

MODÈLE : YHEO- 3

MODÈLE : Y HEO- 3



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT:

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.

précautions d'assemblage

1. Assembler uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut engendrer des risques.
2. Portez des lunettes de sécurité et des gants de travail lors du montage.
3. Maintenez la zone de rassemblement propre et bien éclairée.
4. Tenir les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.
5. Ne pas assembler en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
6. Les capacités du produit s'appliquent uniquement aux produits correctement et entièrement assemblés.
7. Assembler sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité l'appareil de distillation de laboratoire .
8. Pour plus d'informations concernant les pièces mentionnées dans les pages suivantes, veuillez vous référer au schéma de montage de ce manuel. Déballer et séparer toutes les pièces dans un espace de travail propre.

Prenez des précautions

1. NE PAS S'ASSEOIR NI SE TENIR DEBOUT SUR CET OBJET.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de cet article.
3. Ne pas dépasser les capacités de poids.
4. À utiliser uniquement sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité un appareil de distillation de laboratoire entièrement chargé .
5. Utiliser uniquement conformément à l'usage prévu.
6. Inspecter avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.
7. Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés.

Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.

8. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
9. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil
10. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.
11. Cet appareil est destiné à un usage domestique et à des applications similaires telles que :
 - Environnements de bureaux ;
 - maisons de ferme ;
12. Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez que le produit n'est pas anormal avant utilisation. Si c'est le cas, veuillez cesser de l'utiliser.
13. Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.

CONSERVEZ CE MANUEL

INSTRUCTIONS


Merci d'avoir choisi ce modèle . Les accessoires en verre doivent toujours être manipulés avec précaution. Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant utilisation. Ces informations vous permettront d'obtenir les meilleurs résultats possibles.

Nom des pièces	Nombre de pièces	Description
Ballon	1	500 ml
Condensateur à bobine	1	/
Entonnoir à séparation en forme de poire	1	125 ml

Fiole conique	1	100 ml
Bouchon en verre	2	19#
gobelet	1	100 ml
compte-gouttes à tête de colle	1	Tête de colle rouge
brûleur à alcool	1	150 ml
thermomètre	1	100 °C
Bouchon en caoutchouc	4	/
tubes en latex	1	2 m
graisse sous vide	1	Vaseline
papier test de pH	1	/
Brosse pour flacon	1	Petite taille
Support en fer	2	Avec poteau de support de 40 cm
Pince à flacon	2	/
Pince transversale	2	/
Corne de klaxon	1	/
anneau circulaire	2	1 sur 5,1 cm, 1 sur 7,3 cm
filet en terre cuite	1	/

OPERATION

1. Assembler le support en fer ;

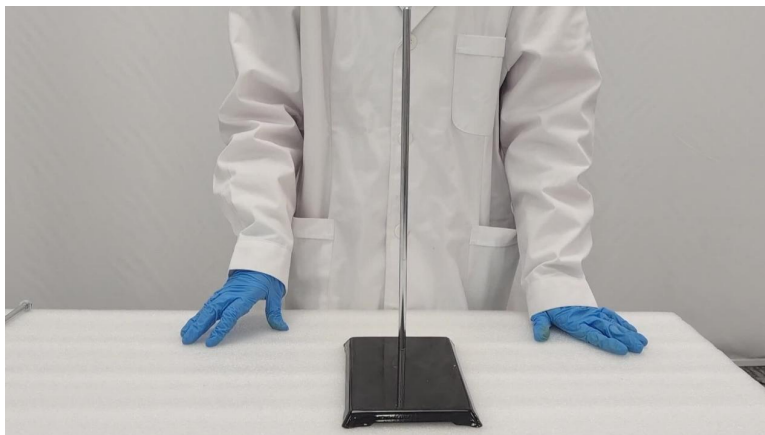


2. Placer le brûleur à alcool ;




3. Installer l'anneau circulaire ;




4. Placez le filet en terre cuite sur l'anneau circulaire et installez la pince en croix et la pince pour flacon à la hauteur appropriée ;

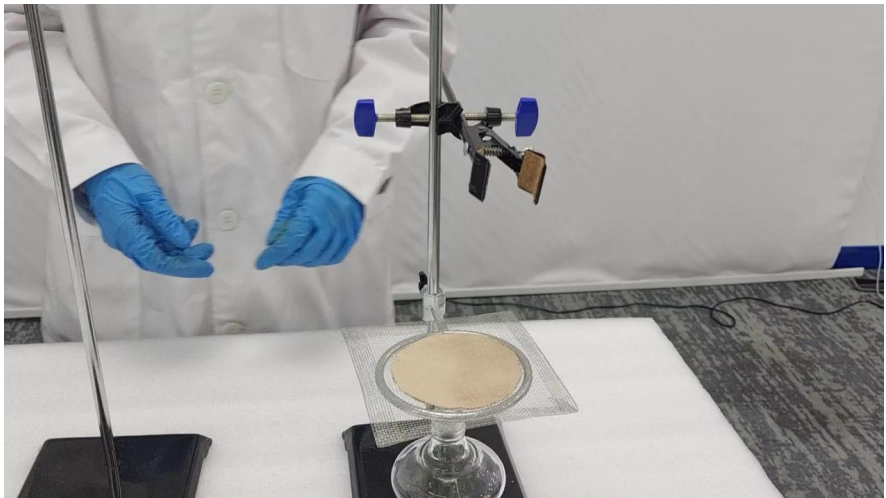


5. Installez le flacon et installez la bride transversale à la hauteur appropriée de l'autre support en fer ;

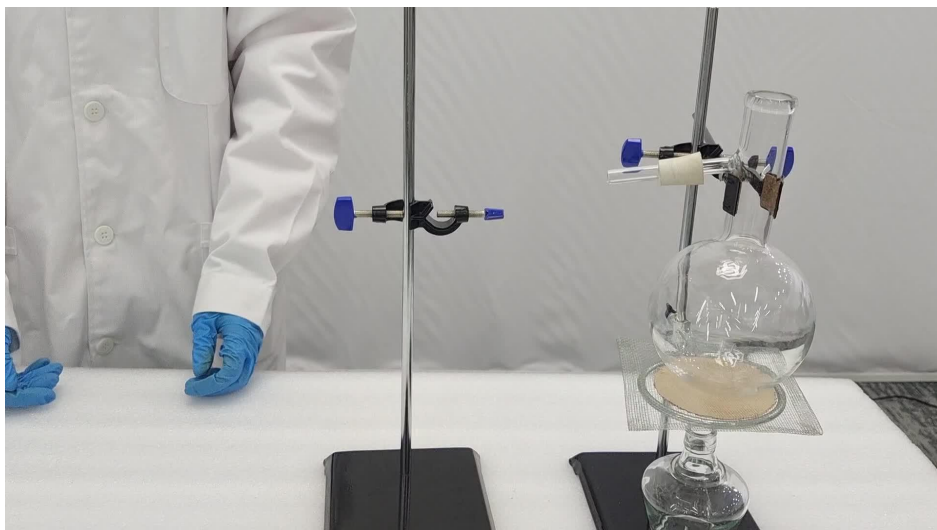

6. Installez le condenseur à serpentin et fixez-le avec la pince à flacon ;

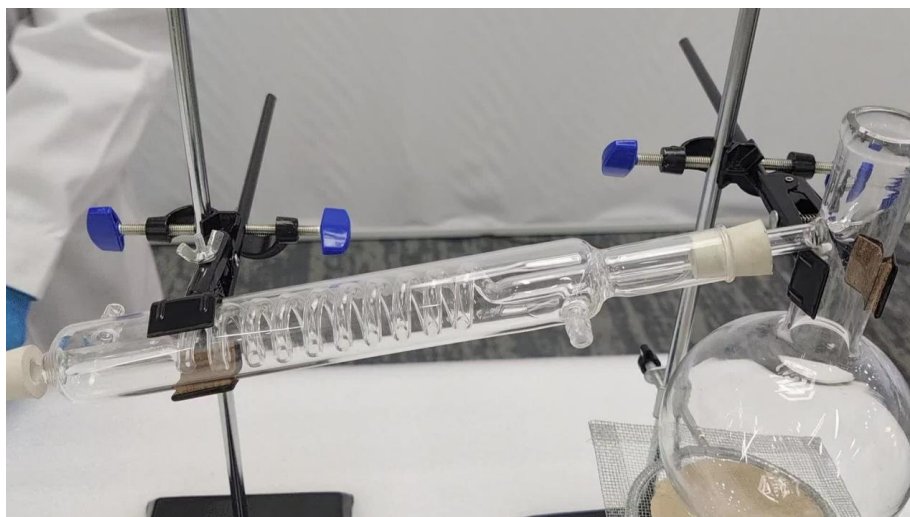


7. Installez le tube cornu et placez le flacon conique sous la sortie du tube cornu ;

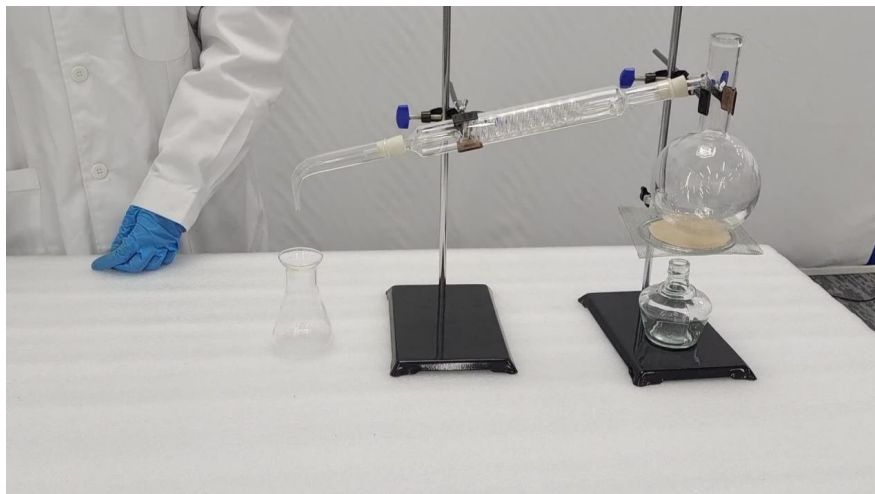

8. Installez l'anneau circulaire à la hauteur appropriée du support en fer, et placez l'entonnoir à décanter en forme de poire dessus, puis placez le b cher sous la sortie de l'entonnoir   d canter en forme de poire ;



9. Vissez le thermomètre dans le bouchon en caoutchouc et installez le bouchon en caoutchouc dans l'ouverture du flacon.

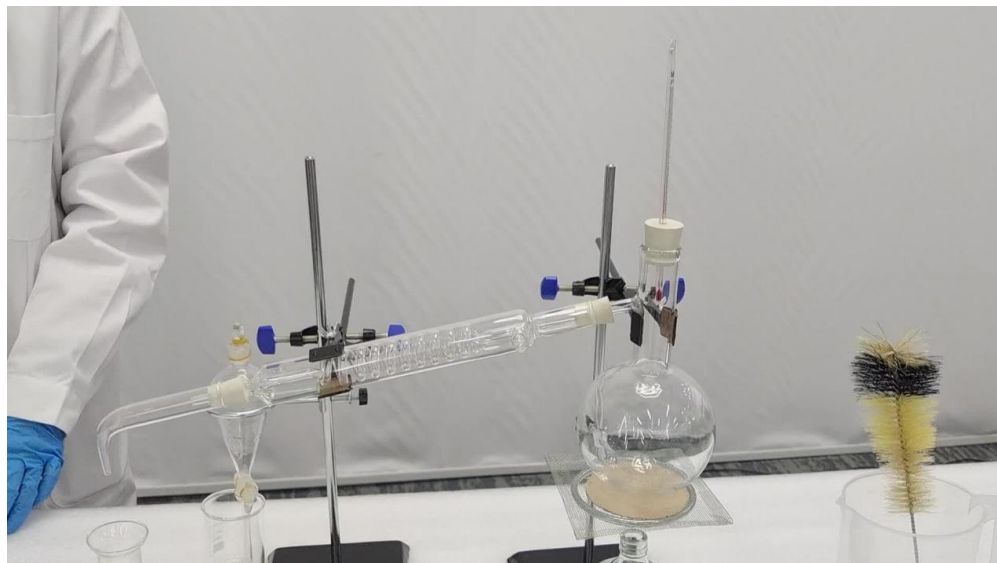

PRODUCT PARAMETER

Modèle	YHEO -3
Méthode de chauffage	brûleur à alcool
Type de flacon	Flacon de distillation





Upgrade · The Home Creator Way

LABORDESTILLATIONSAPPARATUR

Benutzerhandbuch

MODELL: YHEO- 3

MODELL: Y HEO- 3



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNUNG:

Lesen Sie diese Hinweise vor der Verwendung dieses Produkts. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

Vorsichtsmaßnahmen bei Versammlungen

1. Bitte montieren Sie das Produkt ausschließlich gemäß dieser Anleitung. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren bergen.
2. Tragen Sie während der Montage eine Schutzbrille und Arbeitshandschuhe.
3. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie Umstehende während der Versammlung vom Versammlungsort fern.
5. Die Montage sollte nicht erfolgen, wenn man müde ist oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten steht.
6. Die Produkteigenschaften gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
7. Destillationsapparatur muss auf einer ebenen, harten und glatten Oberfläche montiert werden, die ein sicheres Tragen ermöglicht .
8. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie in der Montagezeichnung dieses Handbuchs. Packen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich aus und trennen Sie sie.

Vorsicht walten lassen

1. AUF DIESEM GEGENSTAND SITZEN ODER STEHEN NICHT.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder dürfen nicht mit diesem Artikel spielen oder sich in dessen Nähe aufhalten.
3. Die zulässigen Gewichtsgrenzen dürfen nicht überschritten werden.
4. Nur auf einer ebenen, harten und glatten Oberfläche verwenden, die ein vollständig beladenes Labordestillationsgerät sicher tragen kann .
5. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
6. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.
7. Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben

werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.

8. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
9. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
10. Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
11. Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und in ähnlichen Anwendungen vorgesehen, wie zum Beispiel:
 - Büroumgebungen ;
 - Bauernhäuser;
12. Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie es vor Gebrauch auf Beschädigungen. Sollte es Beschädigungen aufweisen, stellen Sie die Verwendung bitte ein.
13. Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

INSTRUCTIONS


Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Modell entschieden haben . Glasarmaturen sollten stets mit Sorgfalt behandelt werden. Bitte lesen Sie die gesamte Anleitung vor Gebrauch sorgfältig durch. Die Informationen helfen Ihnen, optimale Ergebnisse zu erzielen.

Teilebezeichnung	Anzahl der Teile	Beschreibung
Flasche	1	500 ml
Spulenkondensator	1	/

Birnenförmiger Trenntrichter	1	125 ml
Erlenmeyerkolben	1	100 ml
Glasstopfen	2	19#
Becherglas	1	100 ml
Klebstoffkopf-Tropfer	1	Roter Kleberkopf
Spiritusbrenner	1	150 ml
Thermometer	1	100°C
Gummistopfen	4	/
Latexschläuche	1	2 m
Vakuumfett	1	Vaseline
pH -Testpapier	1	/
Flaschenbürste	1	Kleine Größe
Eisenständer	2	Mit 40 cm Stützstange
Flaschenklemme	2	/
Kreuzklemme	2	/
Hornrohr	1	/
Kreisring	2	1 von 5,1 cm , 1 von 7,3 cm
Terrakotta-Netz	1	/

OPERATION


1. Montieren Sie den eisernen Stützständer;

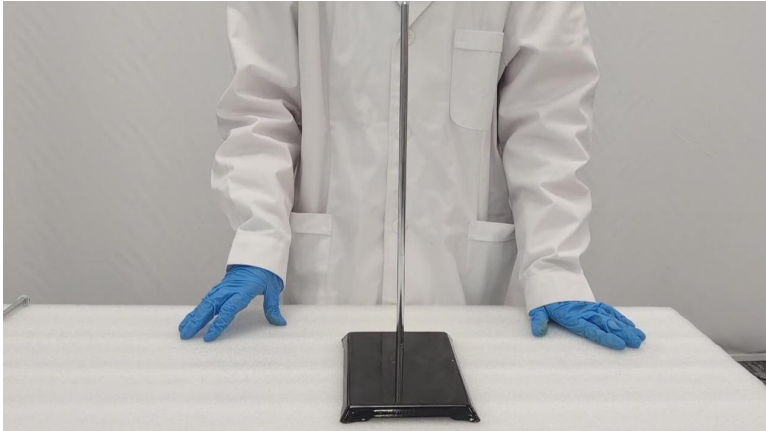


2. Spiritusbrenner aufstellen;




3. Den runden Ring montieren;

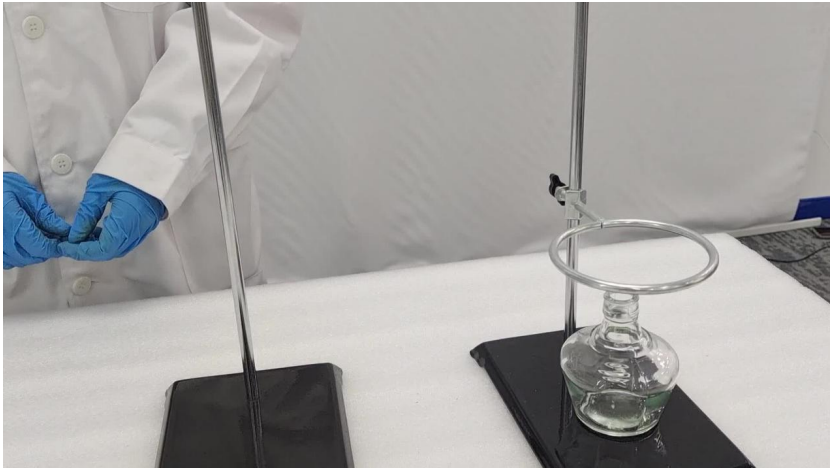


4. Legen Sie das Terrakottanetz auf den kreisförmigen Ring und montieren Sie die Kreuzklemme und die Flaschenklemme in der entsprechenden Höhe;

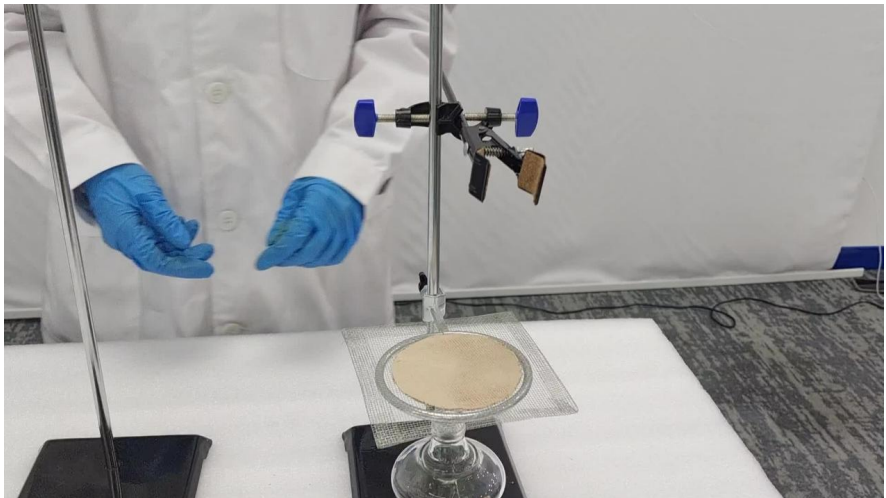


5. Setzen Sie den Kolben ein und montieren Sie die Kreuzklemme in der entsprechenden Höhe am anderen Eisenständer;

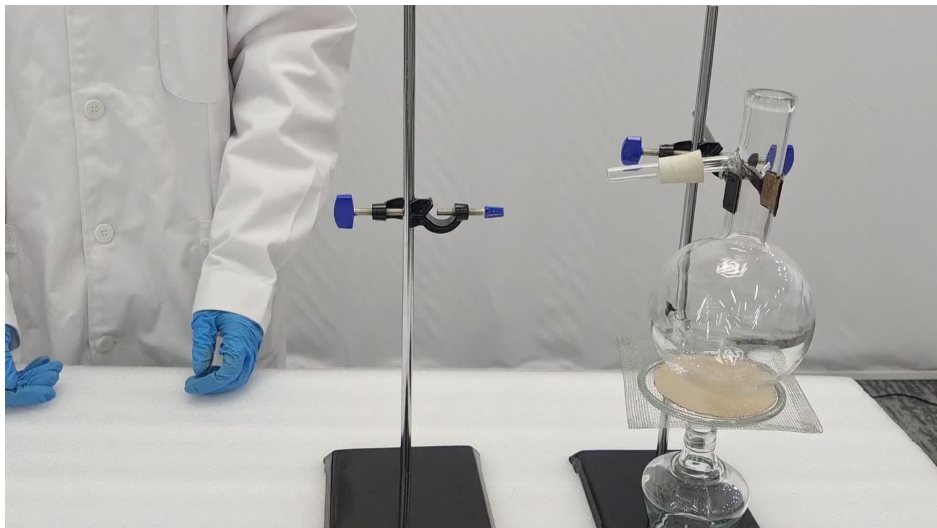

6. Den Spulenkondensator einbauen und mit der Kolbenklemme befestigen;

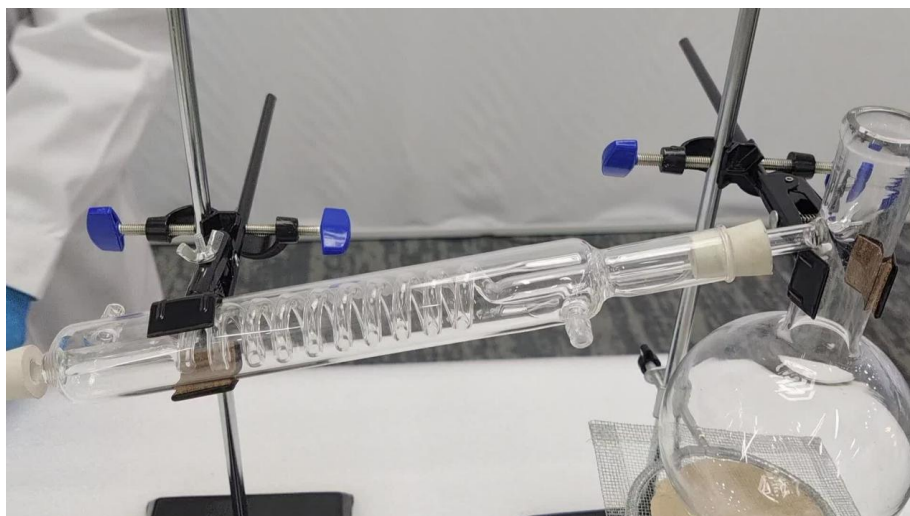


7. Montieren Sie das Hornrohr und platzieren Sie den Erlenmeyerkolben unter dem Auslass des Hornrohrs;

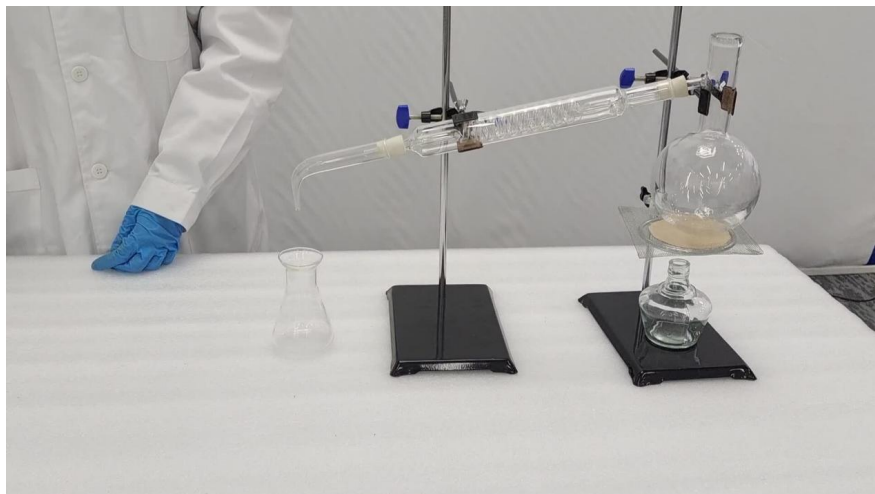

8. Montieren Sie den runden Ring in der passenden Höhe am Eisenständer und setzen Sie den birnenförmigen Scheidetrichter darauf. Stellen Sie dann den Becher unterhalb des Auslasses des birnenförmigen Scheidetrichters.



9. Schrauben Sie das Thermometer in den Gummistopfen und setzen Sie den Gummistopfen in die Öffnung des Kolbens ein.

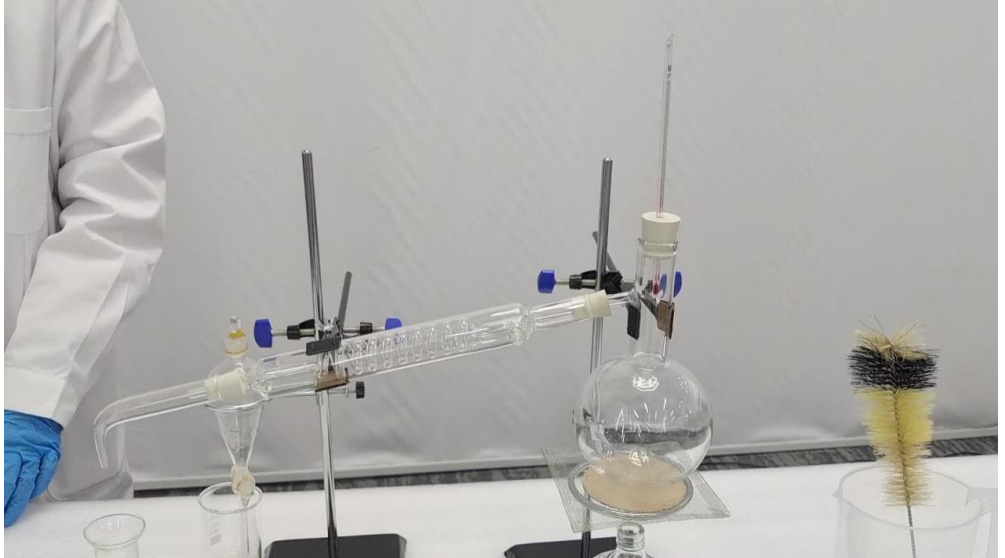

PRODUCT PARAMETER

Modell	YHEO- 3
Heizmethode	Alkoholbrenner
Flaschentyp	Destillierkolben





Upgrade · The Home Creator Way

**APPARECCHIATURA DI DISTILLAZIONE
DA LABORATORIO**

MANUALE utente

MODELLO: YHEO- 3

MODELLO: Y HEO- 3



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVVERTIMENTO:

Leggere attentamente queste informazioni prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni.

Precauzioni per l'assemblea

1. Assemblare il prodotto seguendo esclusivamente queste istruzioni. Un assemblaggio improprio può comportare dei pericoli.
2. Durante l'assemblaggio, indossare occhiali di sicurezza e guanti da lavoro.
3. Mantieni l'area di ritrovo pulita e ben illuminata.
4. Durante l'assemblea, tenere lontani gli astanti.
5. Non radunarsi se stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
6. Le funzionalità del prodotto si applicano solo ai prodotti assemblati correttamente e completamente.
7. Assemblare su una superficie piana, livellata, dura e liscia, in grado di sostenere in sicurezza l'apparecchiatura di distillazione da laboratorio.
8. Per ulteriori informazioni sui componenti elencati nelle pagine seguenti, fare riferimento allo schema di montaggio presente in questo manuale. Disimballare e separare tutti i componenti in un'area di lavoro pulita.

Adottare precauzioni

1. NON SEDERSI O RIMANERE IN PIEDI SU QUESTO OGGETTO.
2. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo oggetto o di avvicinarsi ad esso.
3. Non superare i limiti di peso.
4. Utilizzare esclusivamente su una superficie piana, livellata, dura e liscia, in grado di sostenere in sicurezza un'apparecchiatura di distillazione da laboratorio a pieno carico.
5. Utilizzare esclusivamente per lo scopo previsto.
6. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se le parti sono allentate o danneggiate.
7. Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti.

L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in

aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.

8. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
9. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
10. Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini.
11. Questo apparecchio è destinato all'uso in ambito domestico e in applicazioni simili, quali:
 - Ambienti d'ufficio ;
 - case coloniche;
12. Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.
13. Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso. Attenzione ai potenziali rischi di lesioni derivanti da un uso improprio.

CONSERVARE QUESTO MANUALE

INSTRUCTIONS


Grazie mille per aver scelto questo modello . Gli accessori in vetro vanno sempre maneggiati con cura. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso. Le informazioni contenute vi aiuteranno a ottenere i migliori risultati possibili.

Nome delle parti	Numero di parti	Descrizione
Pallone	1	500 ml
Condensatore a serpentina	1	/
Imbuto separatore a	1	125 ml

forma di pera		
Beuta conica	1	100 ml
Tappo di vetro	2	19#
becher	1	100 ml
Contagocce per colla	1	Testa di colla rossa
bruciatore ad alcol	1	150 ml
termometro	1	100°C
Tappo in gomma	4	/
tubi in lattice	1	2 metri
Grasso sottovuoto	1	Vaselina
cartina reattiva per il pH	1	/
Spazzola per fiaschetta	1	Dimensioni ridotte
supporto in ferro	2	Con asta di supporto da 40 cm
Morsetto per fiaschetta	2	/
Morsetto trasversale	2	/
Tubo a tromba	1	/
Anello circolare	2	1 di 5 .1 cm, 1 di 7.3 cm
Rete in terracotta	1	/

OPERATION


1. Assemblare il supporto in ferro;

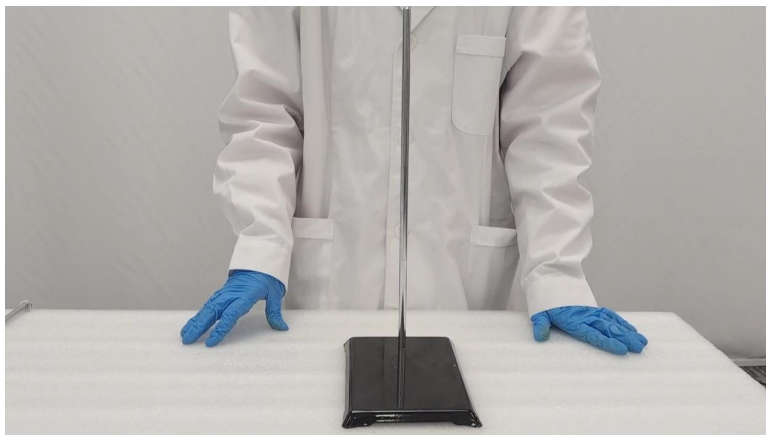


2. Posizionare il bruciatore ad alcool;




3. Installare l'anello circolare;

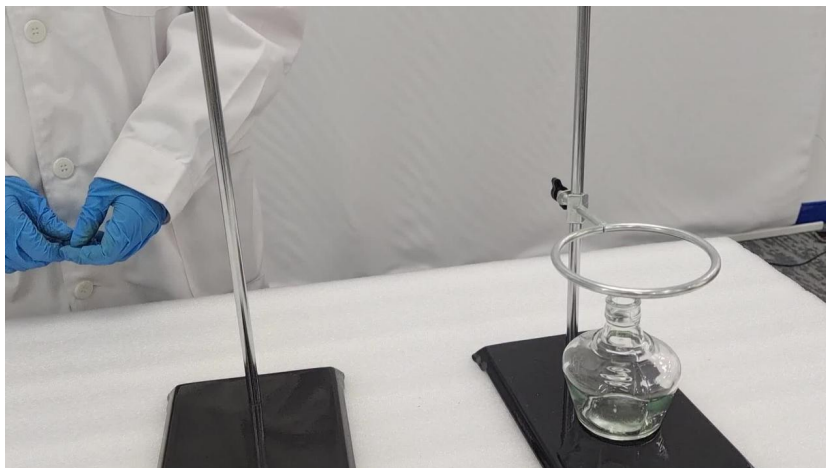


4. Posizionare la rete di terracotta sull'anello circolare e installare il morsetto a croce e il morsetto per fiaschette all'altezza appropriata;

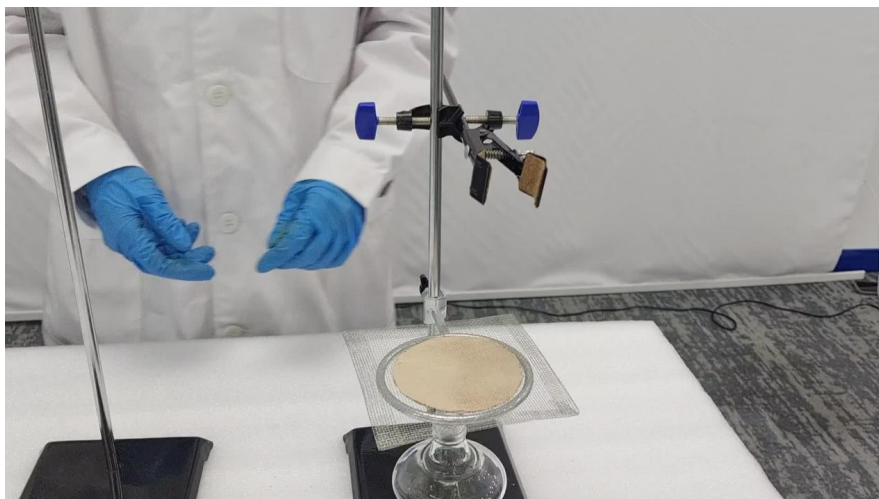


5. Installare la fiaschetta e fissare il morsetto trasversale all'altezza appropriata dell'altro supporto in ferro;

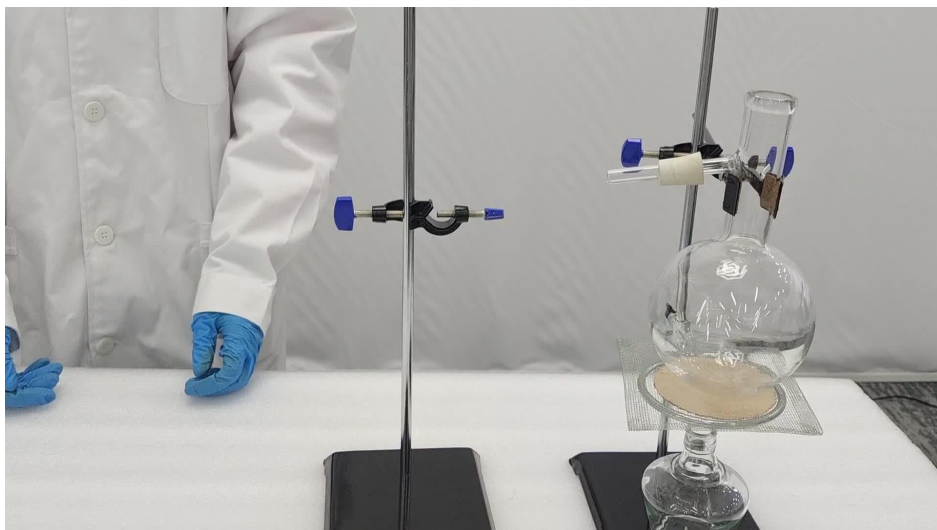


6. Installare il condensatore a serpentina e fissarlo con il morsetto per fiaschetta;

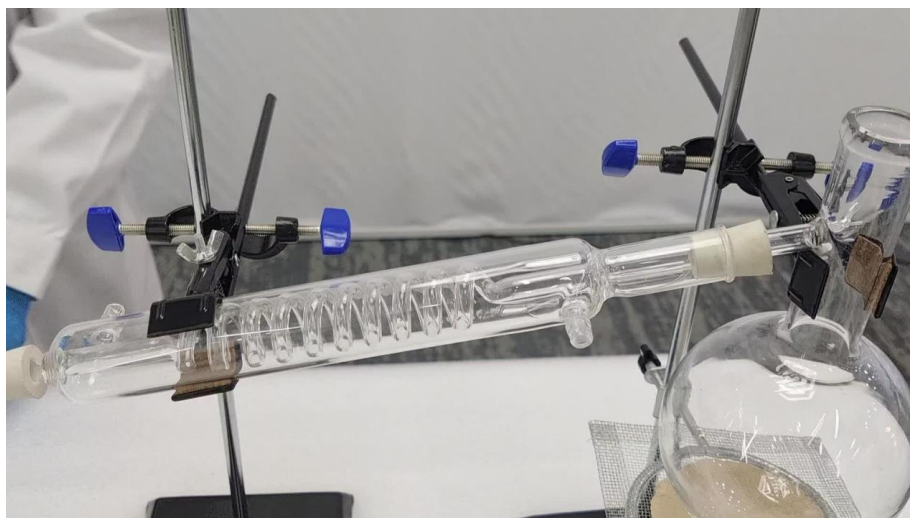


7. Installare il tubo a corno e posizionare la fiasca conica sotto l'uscita del tubo a corno;

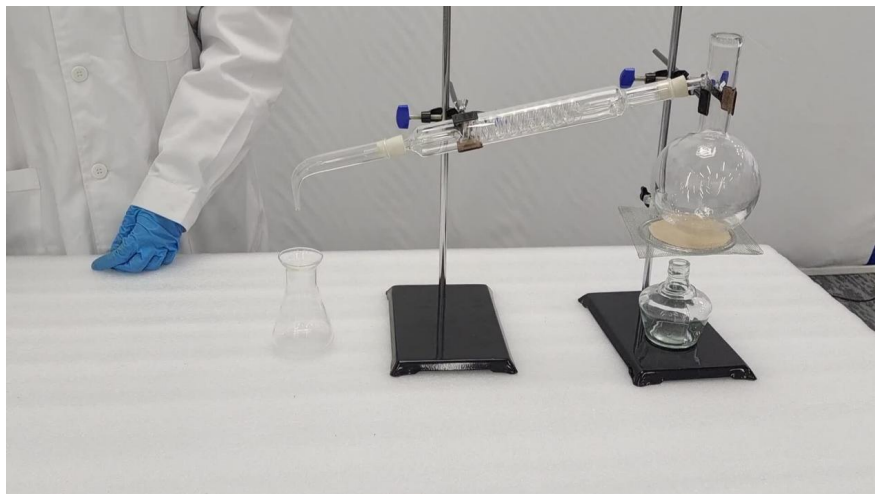

8. Installare l'anello circolare all'altezza appropriata del supporto in ferro e posizionarvi sopra l'imbuto separatore a forma di pera, quindi posizionare il becher al di sotto dell'uscita dell'imbuto separatore a forma di pera;

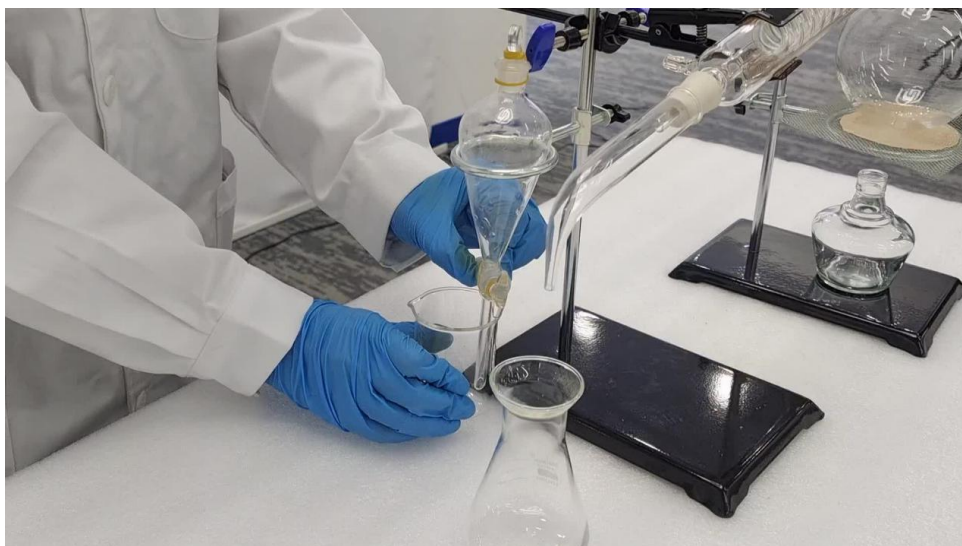

9. Avvita il termometro nel tappo di gomma e inserisci il tappo di gomma nell'imboccatura della fiaschetta.

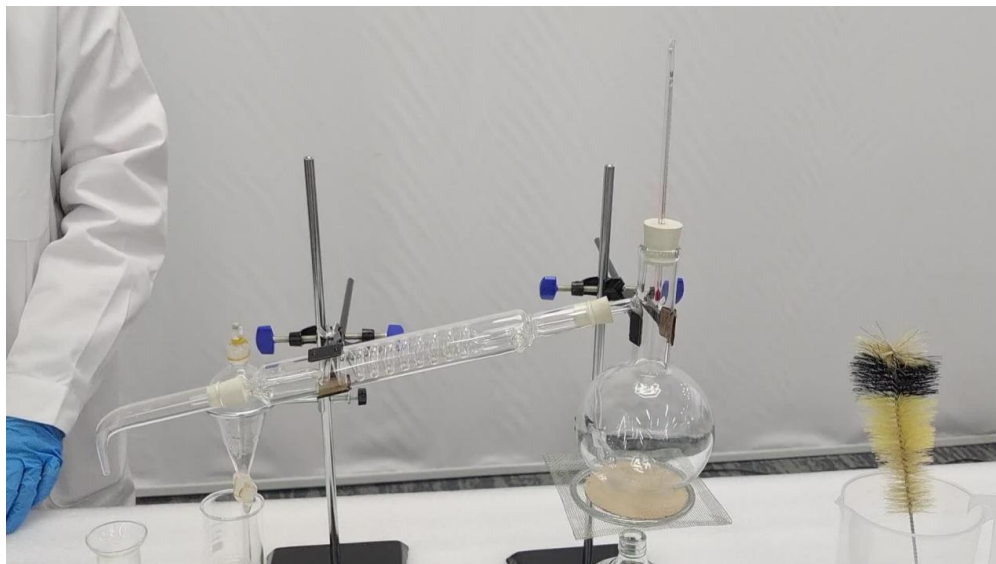

PRODUCT PARAMETER

Modello	YHEO- 3
Metodo di riscaldamento	Bruciatore ad alcol
Tipo di fiaschetta	Fiasca di distillazione





Upgrade · The Home Creator Way

**APARATO DE DESTILACIÓN DE
LABORATORIO**

MANUAL DE usuario

MODELO: YHEO- 3

MODELO: Y HEO- 3



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

SAFETY INSTRUCTIONS

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usar este producto. No hacerlo puede

provocar lesiones graves.

Precauciones de montaje

1. Ensámblelo únicamente siguiendo estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede generar riesgos.
2. Utilice gafas de seguridad y guantes de trabajo durante el montaje.
3. Mantenga la zona de montaje limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los curiosos alejados de la zona durante la concentración.
5. No se reúnan si están cansados o bajo los efectos del alcohol, las drogas o los medicamentos.
6. Las funcionalidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados de forma correcta y completa.
7. Ensámblelo sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa, capaz de soportar de forma segura el aparato de destilación de laboratorio .
8. Para obtener información adicional sobre las piezas que se enumeran en las páginas siguientes, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desempaque y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.

Tome precauciones

1. NO SE SIENTE NI SE PARE SOBRE ESTE ARTÍCULO.
2. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con este artículo ni cerca de él.
3. No exceda la capacidad de peso.
4. Utilizar únicamente sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa, capaz de soportar de forma segura un aparato de destilación de laboratorio completamente cargado .
5. Utilizar únicamente según lo previsto.
6. Inspeccione el producto antes de cada uso; no lo utilice si alguna pieza está suelta o dañada.
7. El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.

8. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.
9. Los niños no deben jugar con el aparato.
10. Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
11. Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
 - Entornos de oficina;
 - casas de campo;
12. Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si el producto presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si presenta alguna anomalía, deje de usarlo.
13. Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.

GUARDE ESTE MANUAL

INSTRUCTIONS


Muchas gracias por elegir este modelo . Los accesorios de vidrio deben manipularse siempre con cuidado. Lea atentamente todas las instrucciones antes de usarlo. Esta información le ayudará a obtener los mejores resultados.

Nombre de las partes	Número de piezas	Descripción
Matraz	1	500 ml
Condensador de serpentín	1	/
Embudo separador en forma de pera	1	125 ml
matraz cónico	1	100 ml

tapón de cristal	2	19#
cubilete	1	100 ml
Gotero de cabeza de pegamento	1	Cabeza de pegamento rojo
quemador de alcohol	1	150 ml
termómetro	1	100 °C
tapón de goma	4	/
Tubos de látex	1	2 metros
grasa de aspiradora	1	Vaselina
Papel de prueba de pH	1	/
Cepillo para matraces	1	Tamaño pequeño
Soporte de hierro	2	Con poste de soporte de 40 cm
Pinza para matraz	2	/
Abrazadera transversal	2	/
Tubo de bocina	1	/
Anillo circular	2	1 de 5,1 cm , 1 de 7,3 cm
Red de terracota	1	/

OPERATION


1. Ensamble el soporte de hierro;

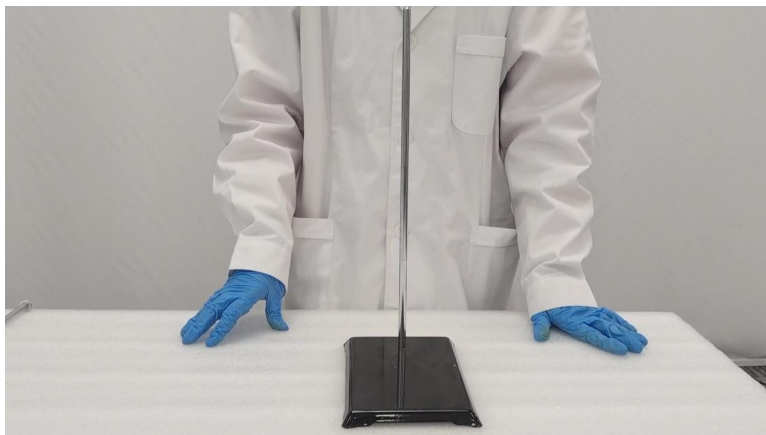


2. Coloque el quemador de alcohol;




3. Instale el anillo circular;

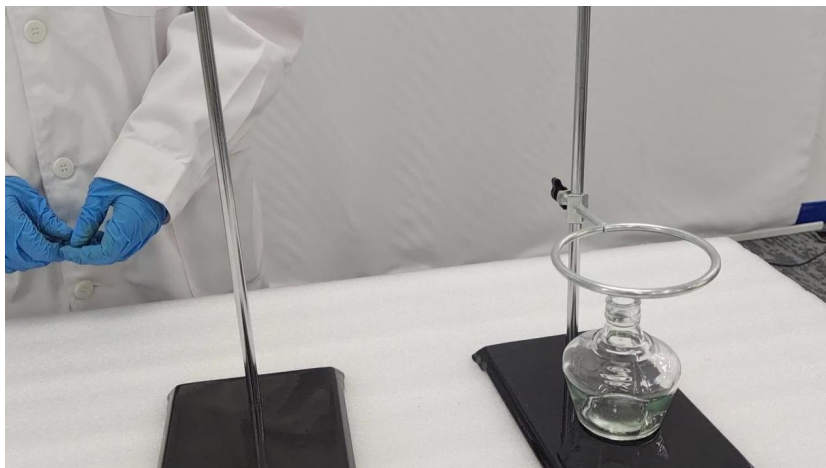


4. Coloque la red de terracota sobre el anillo circular e instale la abrazadera transversal y la abrazadera del matraz a la altura adecuada;

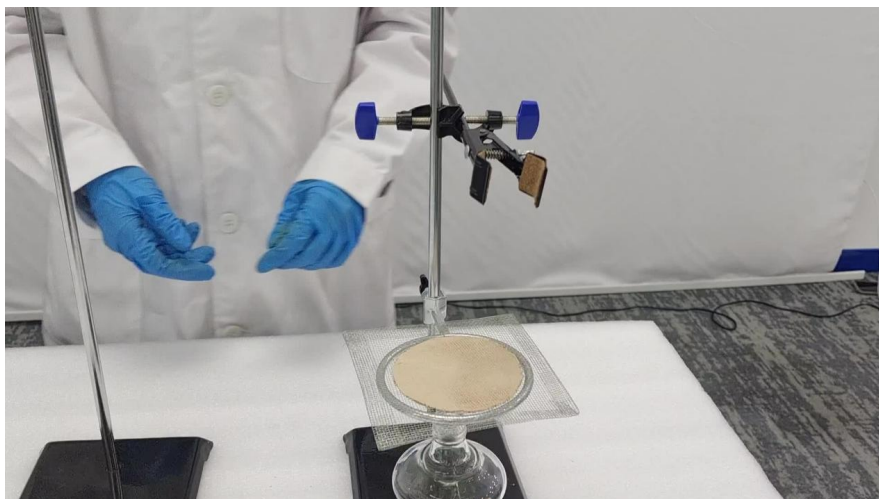


5. Instale el matraz e instale la abrazadera transversal a la altura adecuada del otro soporte de hierro;

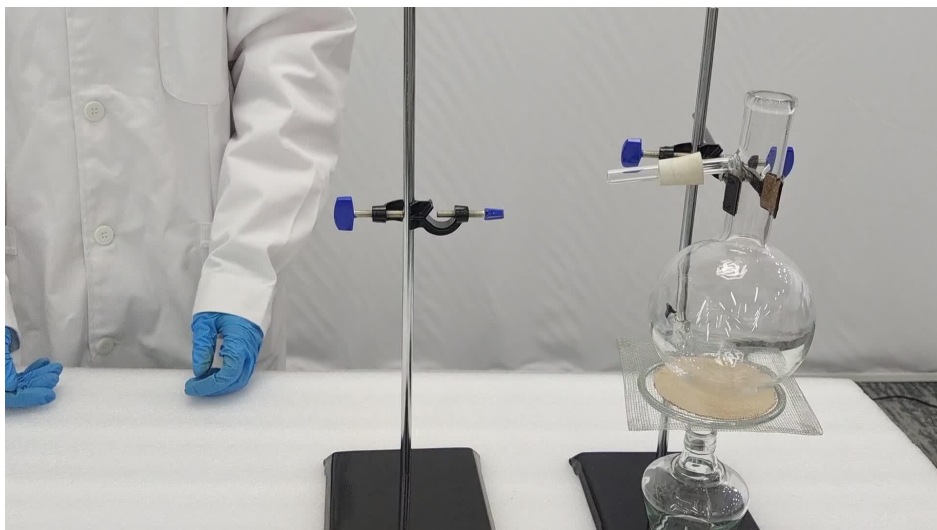


6. Instale el condensador de bobina y fíjelo con la abrazadera del matraz;

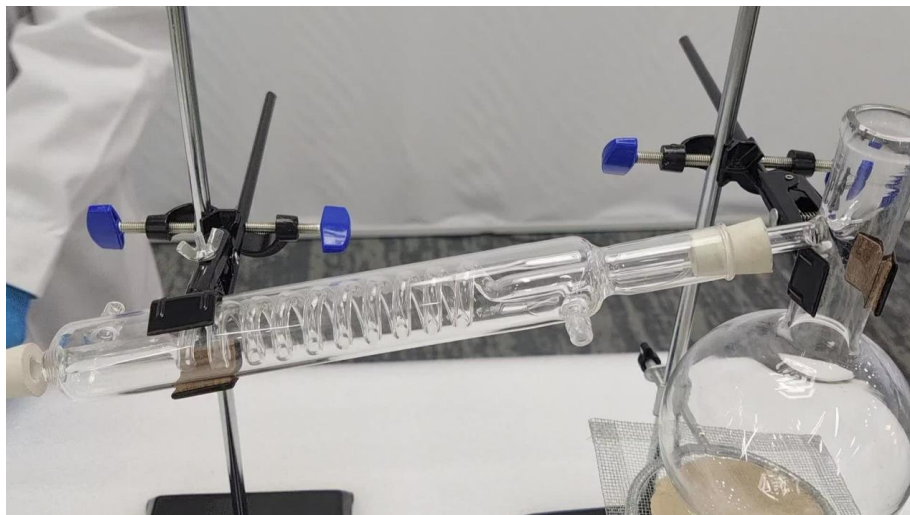


7. Instale el tubo de bocina y coloque el matraz cónico debajo de la salida del tubo de bocina;

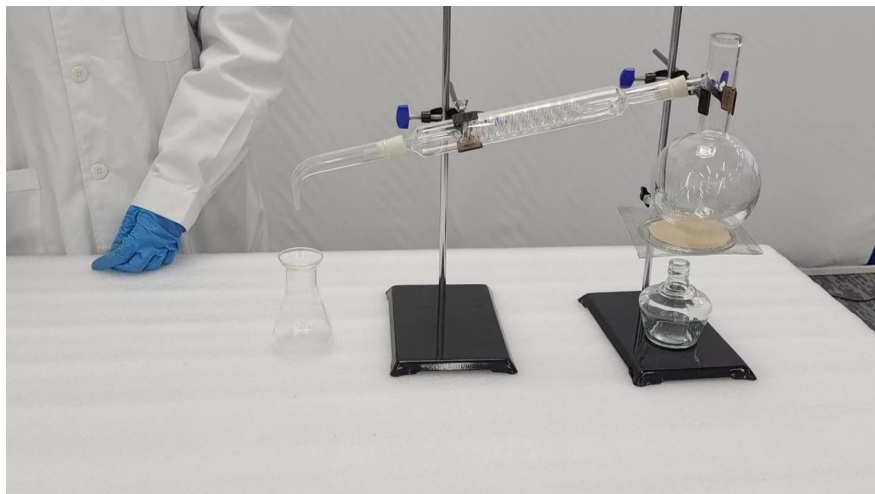

8. Instale el anillo circular a la altura adecuada del soporte de hierro y coloque el embudo de separación en forma de pera sobre él; luego, coloque el vaso de precipitados debajo de la salida del embudo de separación en forma de pera.

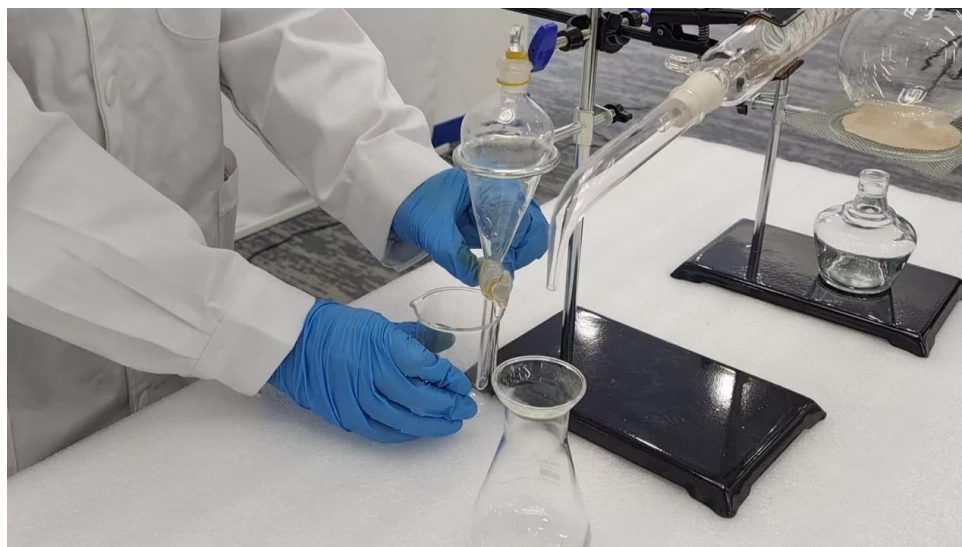

9. Enrosque el termómetro en el tapón de goma e instale el tapón de goma en la boca del matraz.

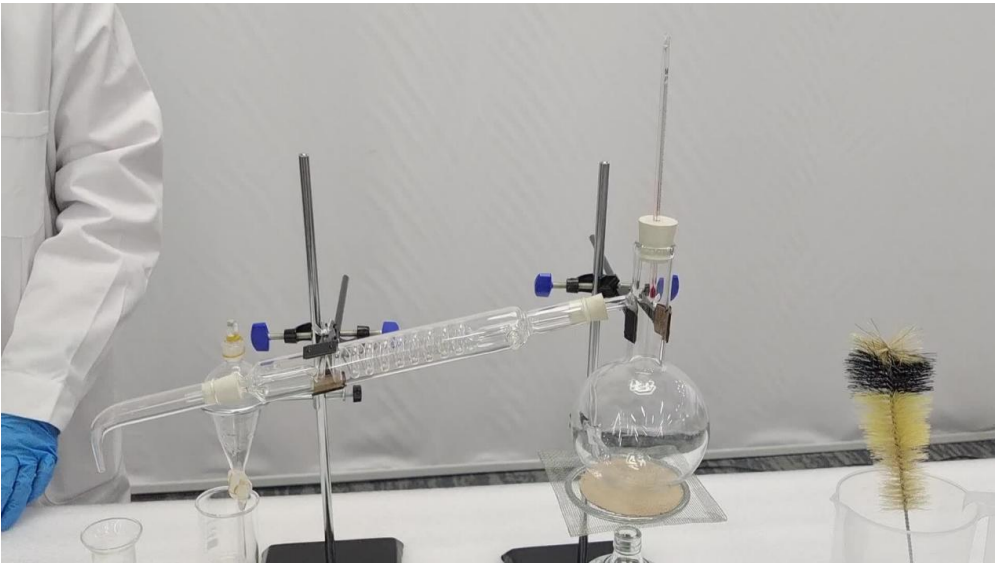

PRODUCT PARAMETER

Modelo	YHEO -3
Método de calentamiento	Quemador de alcohol
Tipo de matraz	Matraz de destilación





Upgrade · The Home Creator Way

APARATURA DO DESTYLACJI

LABORATORYJNEJ

INSTRUKCJA obsługi

MODEL:YHEO- 3

MODEL: Y HEO- 3



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

SAFETY INSTRUCTIONS

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem produktu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować poważne obrażenia.

Środki ostrożności podczas montażu

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.
2. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne i rękawice robocze.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i dobrym oświetleniu.
4. Nie dopuszczać osób postronnych na teren montażu w trakcie jego trwania.
5. Nie należy gromadzić się, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
6. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktów prawidłowo i całkowicie zmontowanych.
7. Zmontować na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie w stanie bezpiecznie utrzymać laboratoryjny aparat destylacyjny .
8. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.

Zachowaj środki ostrożności

1. NIE WOLNO SIEDZIEĆ ANI STAWAĆ NA TYM PRZEDMIOCIE.
2. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani przebywać w jego pobliżu.
3. Nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia.
4. Stosować wyłącznie na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która może bezpiecznie utrzymać w pełni załadowany laboratoryjny aparat destylacyjny .
5. Stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
6. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie używać produktu, jeśli części są luźne lub uszkodzone.
7. Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze

wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

8. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.
9. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
10. To urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci.
11. to przeznaczone jest do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak:
 - Środowiska biurowe ;
 - domy gospodarcze;
12. Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego używania.
13. Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami na skutek niewłaściwego użycia.

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

INSTRUCTIONS


Dziękujemy bardzo za wybór tego modelu . Z okuciami szklanymi należy zawsze obchodzić się ostrożnie. Przed użyciem prosimy o przeczytanie całej instrukcji. Informacje te pomogą Państwu osiągnąć jak najlepsze rezultaty.

Nazwa części	Liczba części	Opis
Kolba	1	500 ml

Kondensator cewkowy	1	/
Lejek rozdzielczy w kształcie gruszki	1	125 ml
Kolba stożkowa	1	100 ml
Korek szklany	2	19#
zlewka	1	100 ml
Kroplomierz z główką klejącą	1	Czerwona główka kleju
Palnik alkoholowy	1	150 ml
termometr	1	100°C
Korek gumowy	4	/
Rurki lateksowe	1	2m
Smar próżniowy	1	Wazelina
Papierek testowy pH	1	/
Pędzel do kolby	1	Mały rozmiar
Podstawa żelazna	2	Z drążkiem podporowym o długości 40 cm
Zacisk do kolby	2	/
Zacisk krzyżowy	2	/
Rura rogowa	1	/
Pierścień okrągły	2	1 z 50,1 cm, 1 z 7,3 cm
Siatka terakotowa	1	/

OPERATION


1. Złóż stojak pod żelazko;

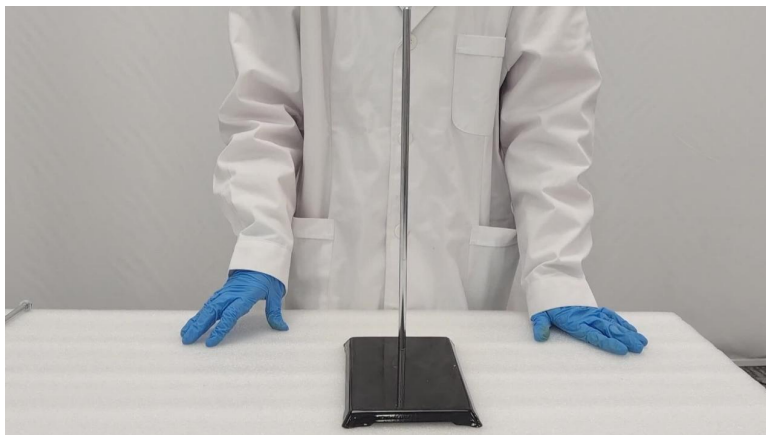


2. Umieść palnik spirytusowy;




3. Zamontuj pierścień okrągły;

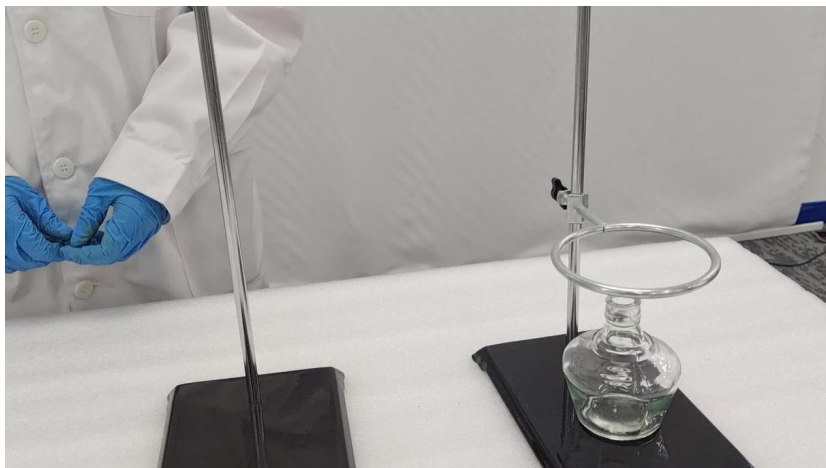


4. Umieść siatkę terakotową na pierścieniu okrągłym i zamontuj zacisk krzyżowy i zacisk kolby na odpowiedniej wysokości;

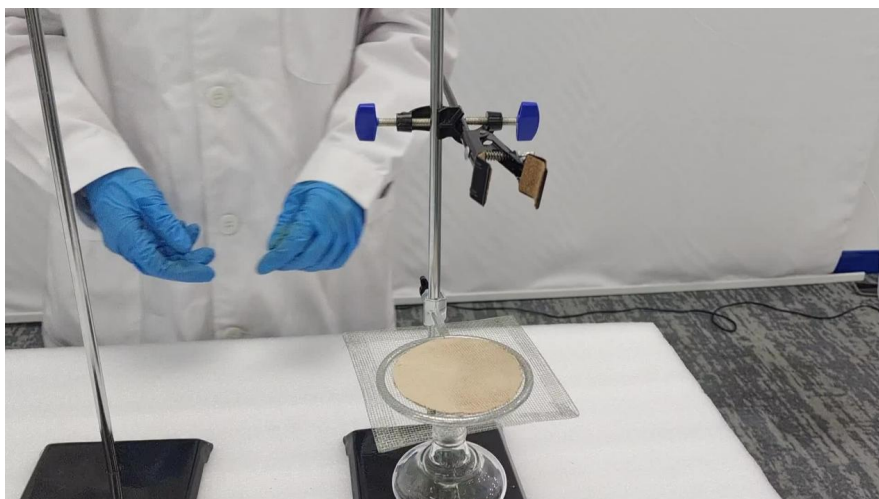


5. Zainstaluj kolbę i zamontuj zacisk poprzeczny na odpowiedniej wysokości drugiego stojaka podtrzymującego żelazo;

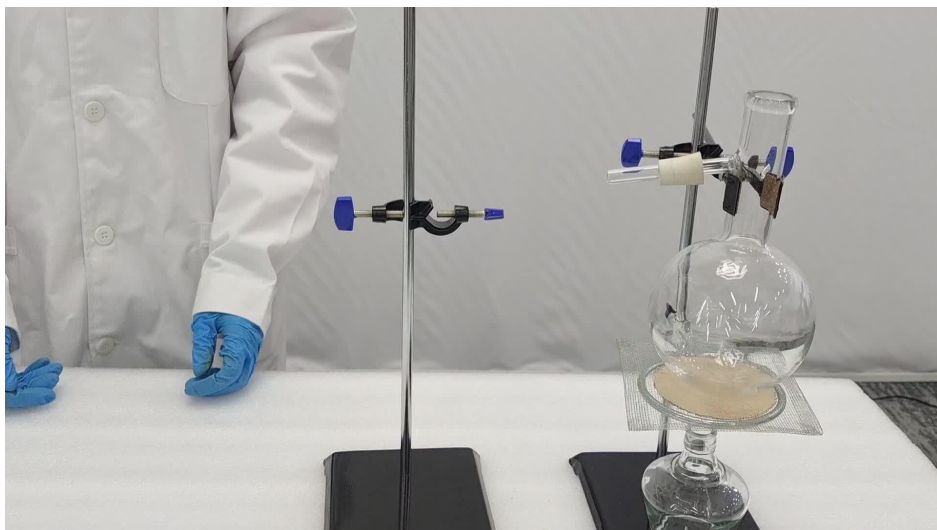

6. Zamontuj kondensator cewki i zamocuj go za pomocą zacisku kolby;

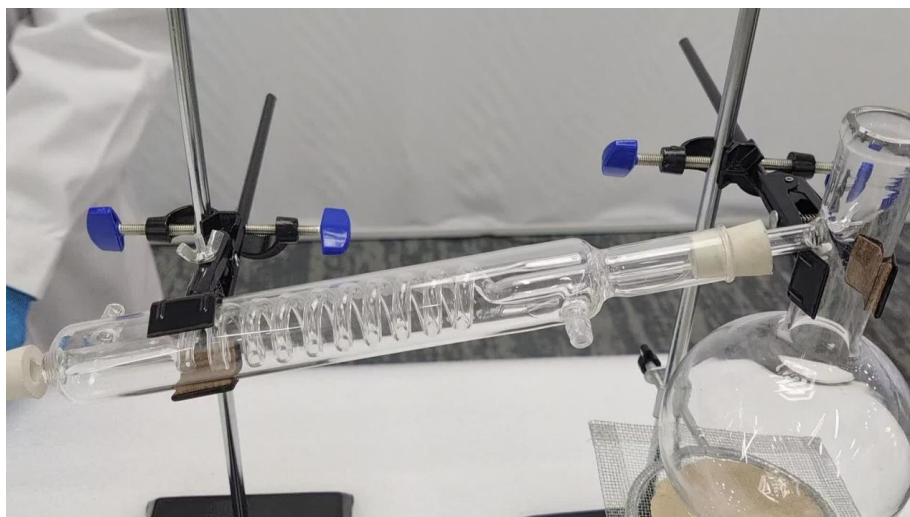


7. Zamontuj rurę tubową i umieść kolbę stożkową pod wylotem rury tubowej;

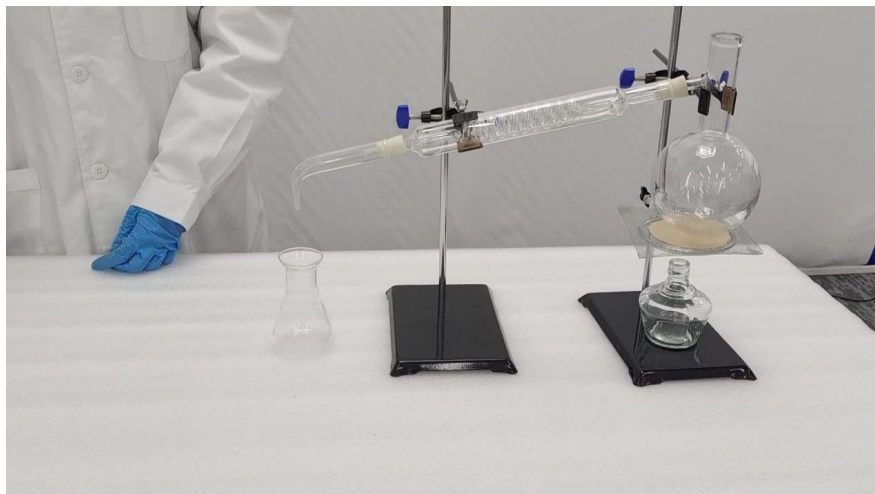

8. Zainstaluj pierścień okrągły na odpowiedniej wysokości podstawy żelazka i umieść na nim lejek rozdzielczy w kształcie gruszki, a następnie umieść zlewkę pod wylotem lejka rozdzielczego w kształcie gruszki;



9. Wkręć termometr w gumowy korek i zamontuj go w szyjce kolby.

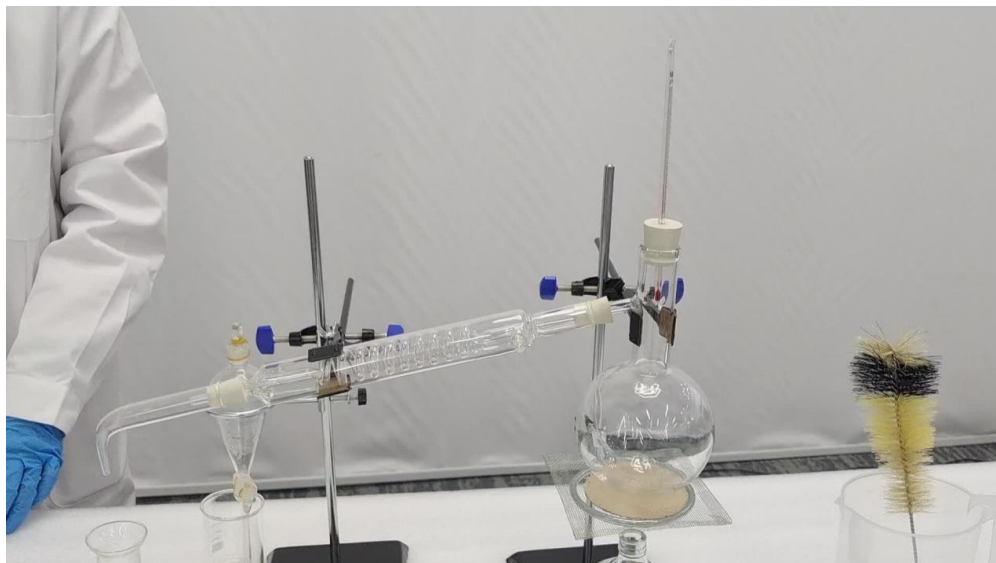

PRODUCT PARAMETER

Model	YHEO- 3
Metoda ogrzewania	Alkoholowy palacz
Typ kolby	Kolba destylacyjna





Upgrade · The Home Creator Way

LABORATORIUMDESTILLATIEAPPARAT

UUR

Gebruikershandleiding

MODEL: YHEO- 3

MODEL: Y HEO- 3



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WAARSCHUWING:

Lees deze informatie voordat u dit product gebruikt. Het niet nalezen ervan kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

Montagevoorzorgsmaatregelen

1. Monteer het product uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijke situaties veroorzaken.
2. Draag een veiligheidsbril en werkhandschoenen tijdens de montage.
3. Zorg ervoor dat de montageruimte schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de bijeenkomst.
5. Monteer de onderdelen niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
6. De producteigenschappen gelden alleen voor correct en volledig geassembleerde producten.
7. laboratoriumdestillatieapparaat veilig kan dragen .
8. Raadpleeg voor meer informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld, het montageschema in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en sorteer ze in een schone werkruimte.

Neem voorzorgsmaatregelen.

1. NIET OP DIT ARTIKEL ZITTEN OF STAAN.
2. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met dit product spelen en laat ze er niet in de buurt komen.
3. Overschrijd de maximale gewichtslimiet niet.
4. laboratoriumdestillatie-installatie veilig kan dragen .
5. Gebruik uitsluitend zoals bedoeld.
6. Controleer het product voor elk gebruik; gebruik het product niet als onderdelen loszitten of beschadigd zijn.
7. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
8. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een

- persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat.
9. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
 10. Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door kinderen. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.
 11. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudens en soortgelijke toepassingen, zoals:
 - Kantooromgevingen ;
 - boerderijen;
 12. Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.
 13. Gebruik het product volgens het beoogde doel; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

INSTRUCTIONS

Hartelijk dank dat u voor dit model hebt gekozen . Glazen armaturen moeten altijd met zorg worden behandeld. Lees alle instructies aandachtig door voordat u het product gebruikt. Deze informatie helpt u om de best mogelijke resultaten te behalen.

Onderdeelnaam	Aantal onderdelen	Beschrijving
Fles	1	500 ml
Spoelcondensator	1	/
Peervormige scheidingsrechter	1	125 ml
Conische kolf	1	100 ml
Glazen stop	2	19#
beker	1	100 ml
Lijmkop druppelaar	1	Rode lijmkop
Alcoholbrander	1	150 ml
thermometer	1	100°C

Rubberen plug	4	/
Latex slang	1	2m
Vacuümvet	1	Vaseline
pH -testpapier	1	/
Flesborstel	1	Klein formaat
IJzeren steunstandaard	2	Met een steunpaal van 40 cm
Flesklem	2	/
Kruisklem	2	/
Hoornbuis	1	/
Ronde ring	2	1 van 5,1 cm , 1 van 7,3 cm
Terracotta net	1	/

OPERATION


1. Monteer de ijzeren steunconstructie;




2. Plaats de alcoholbrander;




3. Installeer de ronde ring;

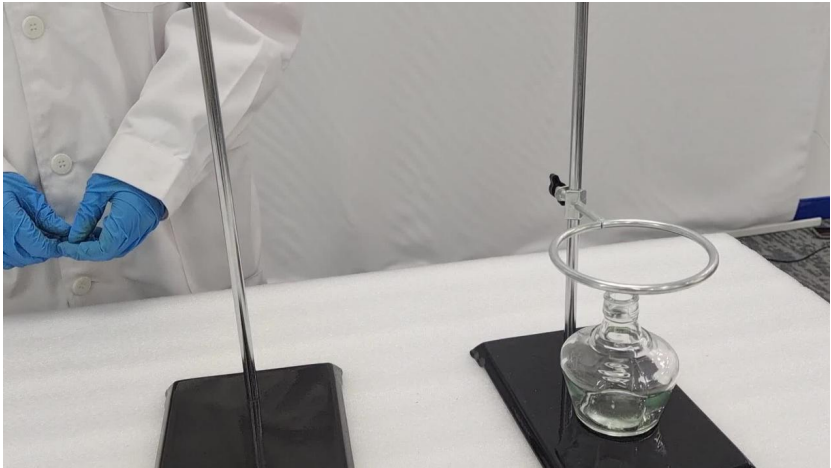


4. Plaats het terracotta net op de ronde ring en bevestig de kruisklem en de kolfklem op de juiste hoogte;

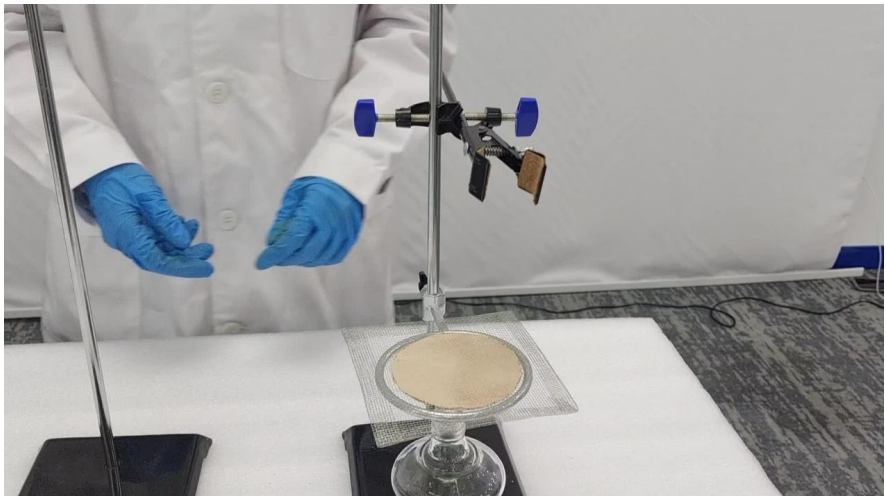


5. Plaats de kolf en bevestig de dwarsklem op de juiste hoogte aan de andere ijzeren steunpaal;

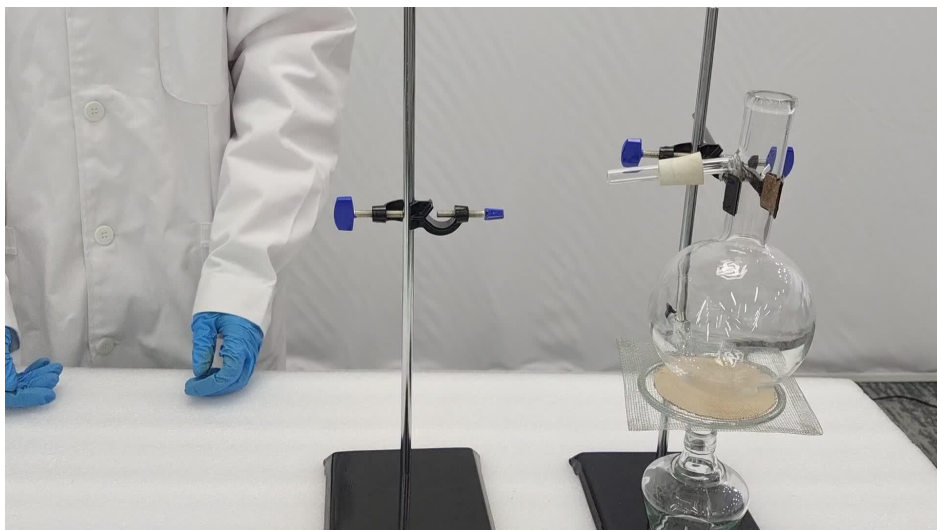


6. Installeer de spiraalcondensor en bevestig deze met de klem van de kolf;

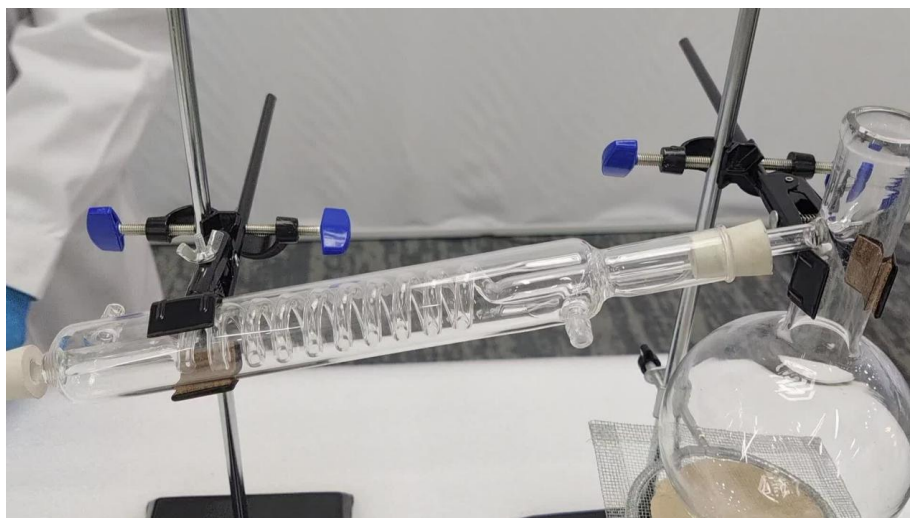


7. Installeer de hoornbuis en plaats de conische kolf onder de uitlaat van de hoornbuis;

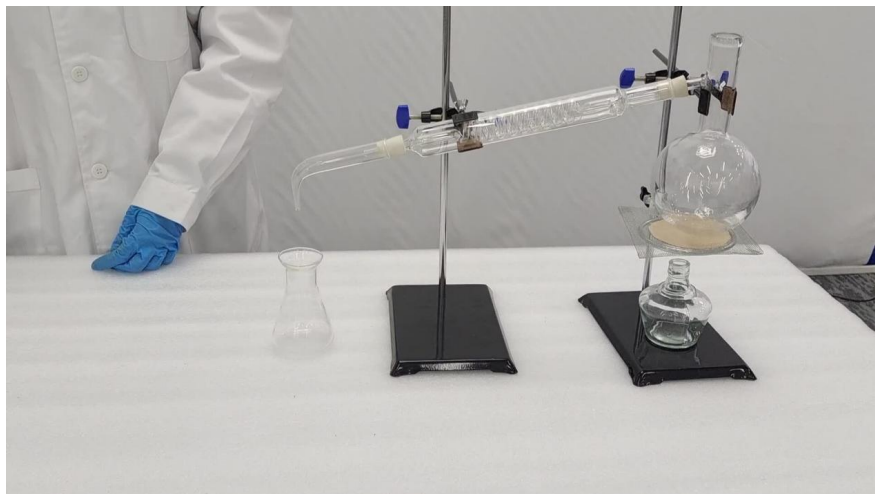

8. Plaats de ronde ring op de juiste hoogte op de ijzeren steun en zet de peervormige scheidtrechter erop. Plaats vervolgens de beker onder de uitlaat van de peervormige scheidtrechter.

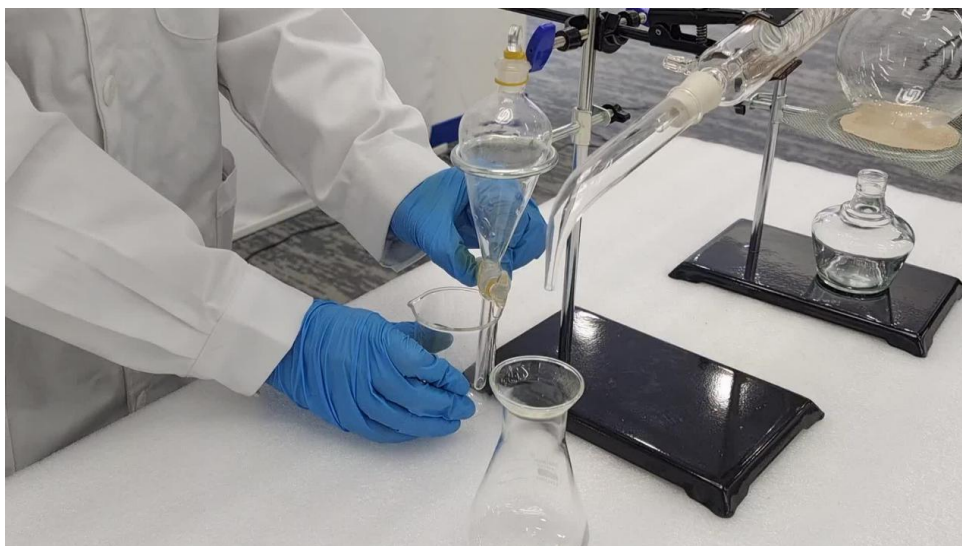

9. Draai de thermometer in de rubberen stop en plaats de rubberen stop in de opening van de fles.

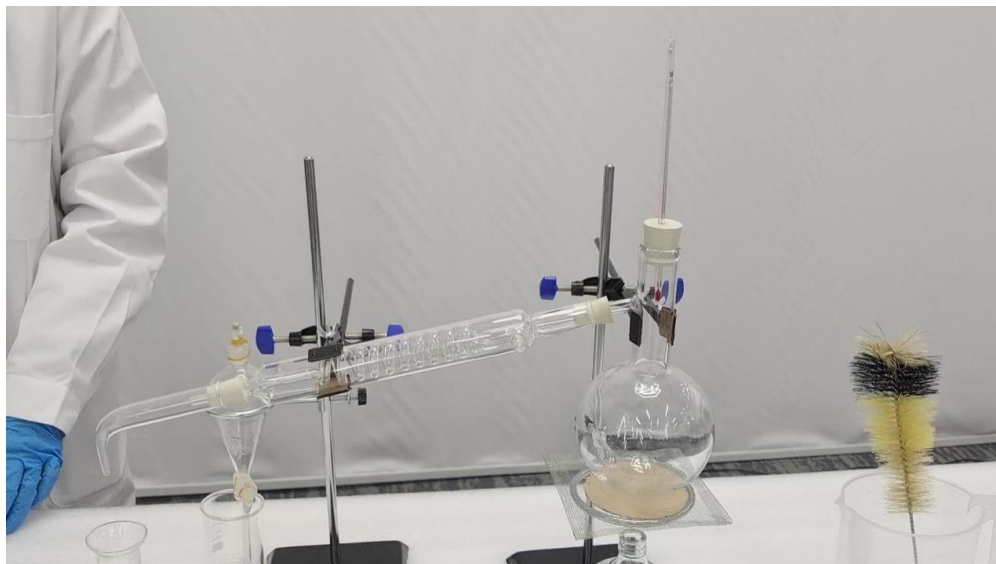

PRODUCT PARAMETER

Model	YHEO -3
Verwarmingsmethode	Alcoholbrander
Flestype	Destilleerfles





Upgrade · The Home Creator Way

LABDESTILLATIONSAPPARAT

Användarmanual

MODELL: YHEO- 3

MODELL: Y HEO- 3



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SAFETY INSTRUCTIONS

VARNING:

Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.

Monteringsförsiktighetsåtgärder

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa risker.
2. Använd skyddsglasögon och arbetshandskar under monteringen.
3. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
6. Produkttegenskaperna gäller endast korrekt och fullständigt monterade produkter.
7. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan bära laboratedestillationsapparaten .
8. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta.

Använd försiktighetsåtgärder

1. SITTA ELLER STÅ INTE PÅ DENNA FÖRENING.
2. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av denna produkt.
3. Överskrid inte viktkapaciteten.
4. Använd endast på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan bära en fullt lastad laboratedestillationsapparat .
5. Använd endast som avsett.
6. Kontrollera före varje användning; använd inte om delar är lösa eller skadade.
7. Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
8. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn)

med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

9. Barn får inte leka med apparaten
10. Denna apparat får inte användas av barn. Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn.
11. Denna apparat är avsedd att användas i hushållet och liknande tillämpningar såsom:
 - Kontorsmiljöer ;
 - bondgårdar;
12. Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.
13. Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.

SPARA DENNA HANDBOK

INSTRUCTIONS


Tack så mycket för att du valde den här modellen . Glasbeslag bör alltid hanteras varsamt. Läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen hjälper dig att uppnå bästa möjliga resultat.

Delarnas namn	Antal delar	Beskrivning
Kolv	1	500 ml
Spolkondensor	1	/
Päronformad separatratt	1	125 ml
Konisk kolv	1	100 ml
Glaspropp	2	19#
bägare	1	100 ml
Limhuvuddroppar	1	Rött limhuvud
Alkoholbrännare	1	150 ml

termometer	1	100 °C
Gummiplugg	4	/
Latexslang	1	2m
Vakuumfett	1	Vaselin
pH- testpapper	1	/
Kolvborste	1	Liten storlek
Stödstativ i järn	2	Med 40 cm stödstång
Kolvklämma	2	/
Kryssklämma	2	/
Hornrör	1	/
Cirkulär ring	2	1 av 5,1 cm , 1 av 7,3 cm
Terrakottanät	1	/

OPERATION


1. Montera järnstödet;

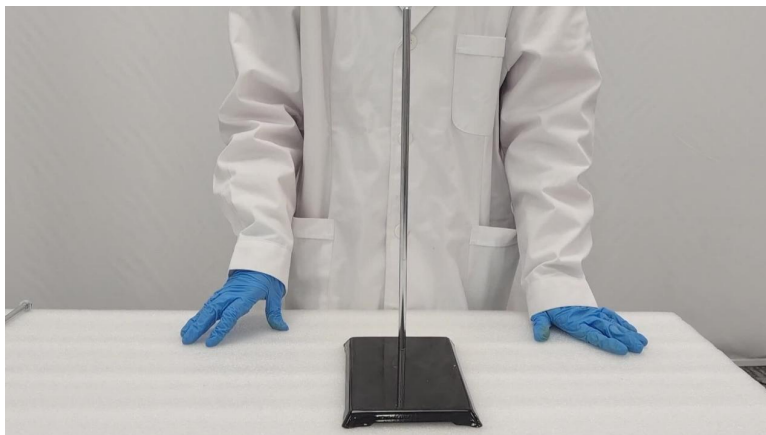


2. Placera alkoholbrännaren;




3. Montera den cirkulära ringen;

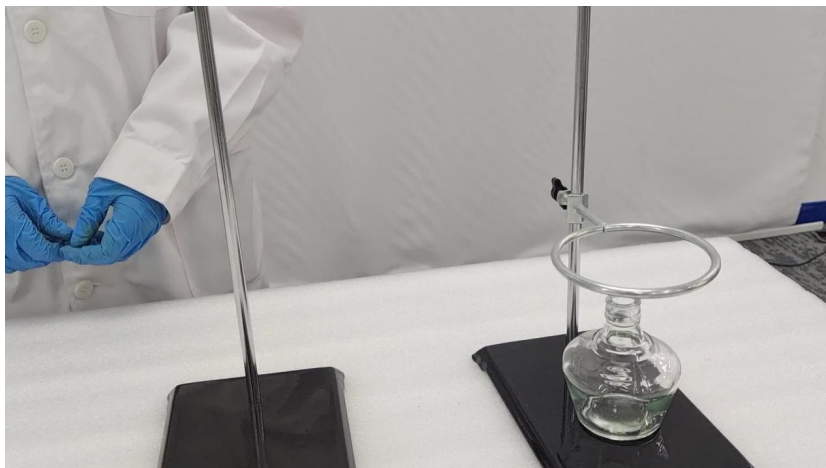


4. Placera terrakottanätet på den cirkulära ringen och montera kryssklämman och flaskklämman på lämplig höjd;

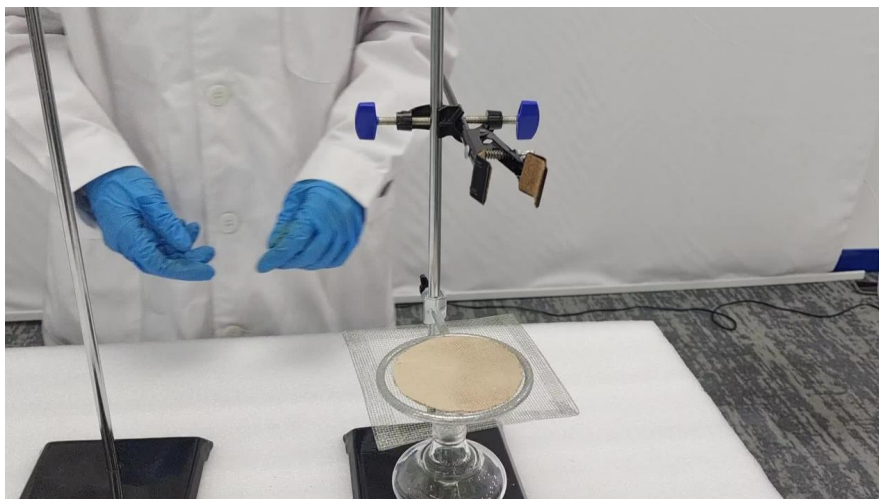


5. Montera kolven och montera kryssklämman på lämplig höjd för det andra järnstödet;

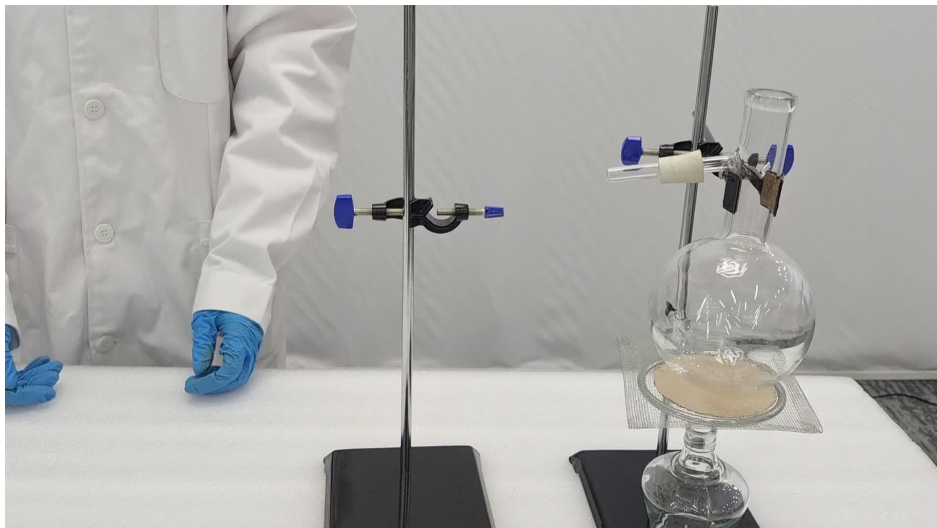


6. Montera spolkondensorn och fixera den med kolvklämman;

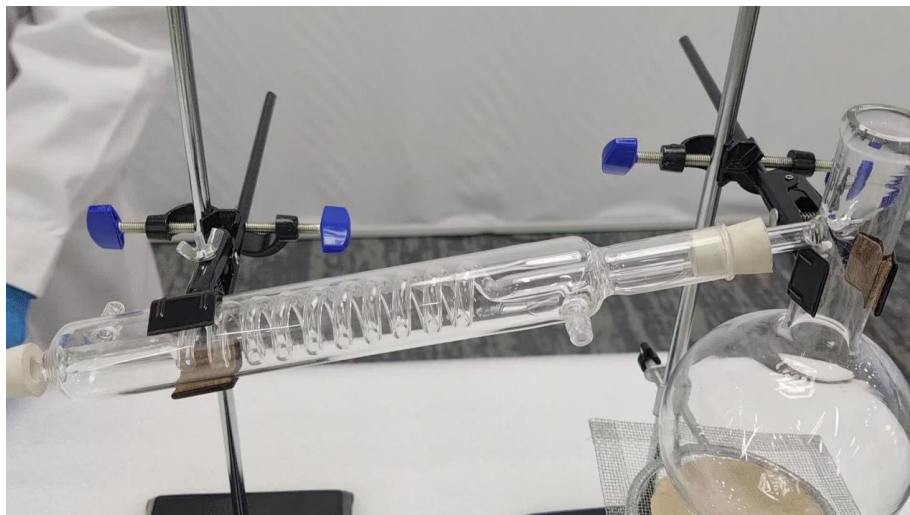


7. Montera hornröret och placera den koniska kolven under hornrörets utlopp;

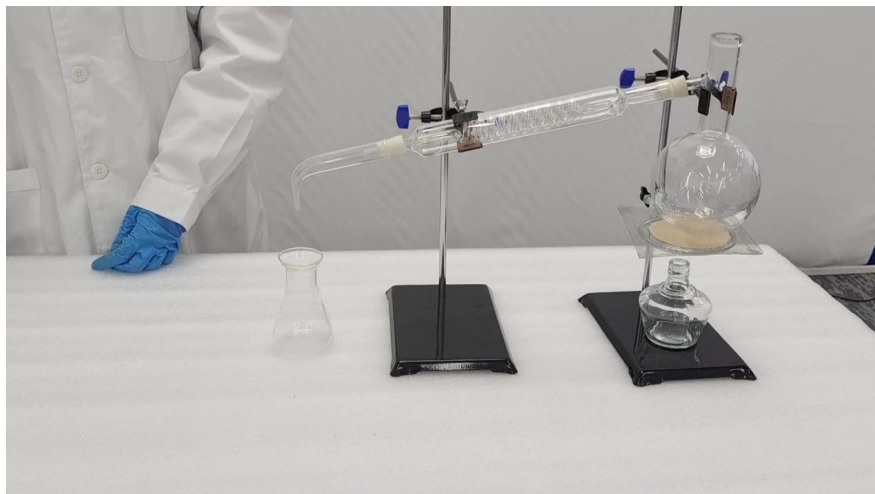

8. Montera den cirkulära ringen på lämplig höjd på järnstativet och placera den päronformade separationstratten på den. Placera sedan bägaren under utloppet på den päronformade separationstratten.

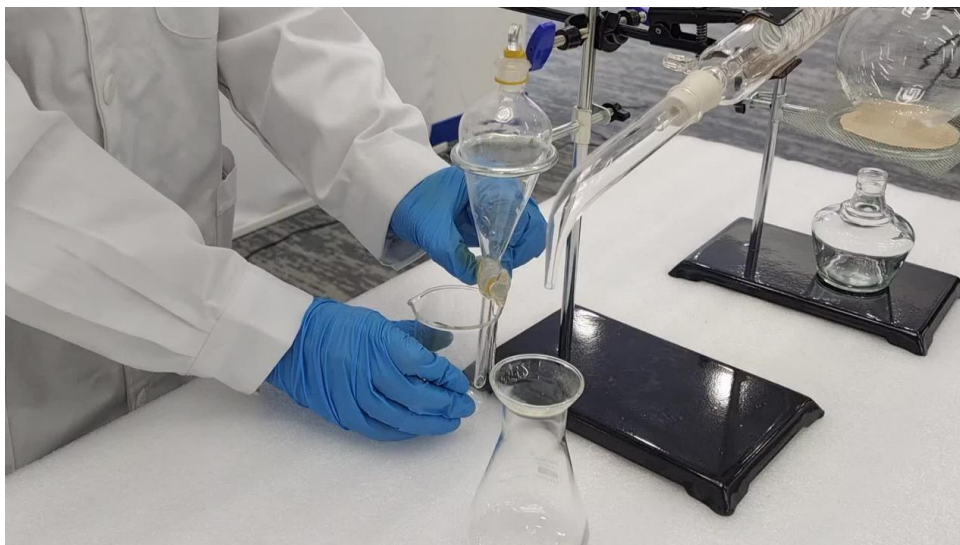

9. Skruva fast termometern i gummiproppen och montera gummiproppen i kolvens mynning.

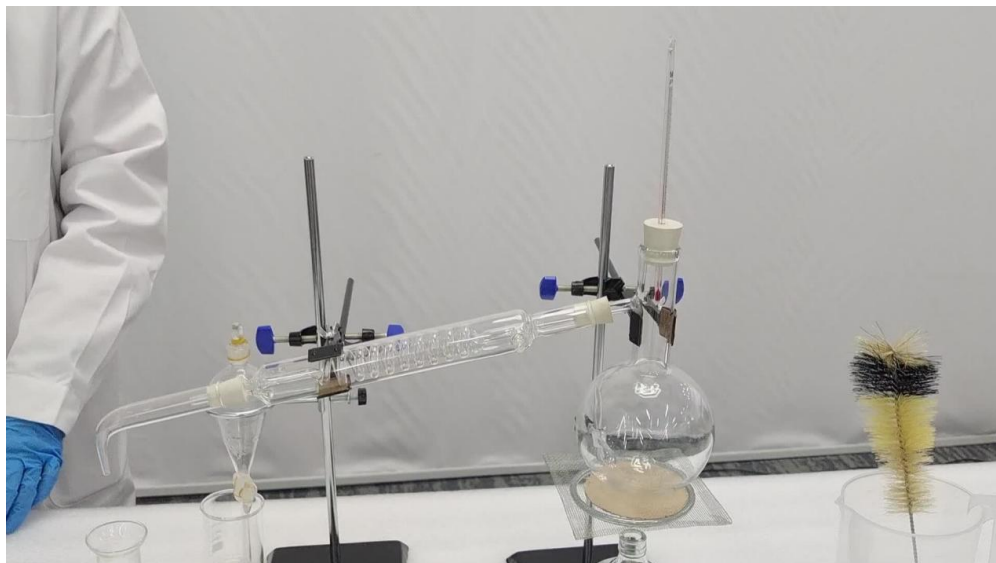

PRODUCT PARAMETER

Modell	YHEO- 3
Uppvärmningsmetod	Alkoholbrännare
Kolvtyp	Destillationsflaska

